

C.O.B.R.A.

IN DEZE C.O.B.R.A.



SOMATEX

EXCLUSIEF BIJ
COBRA MEDICAL 



COBRA MEDICAL VEROVERT
DISTRIBUTEURSHIP

**MAMMOTOME
EN NEOPROBE** 



LOKALISATIE- DRADEN:

DE GROOTSTE KEUZE
BIJ COBRA MEDICAL! 

NIEUW

BIJ COBRA MEDICAL!

THE MAMMOTOME SYSTEM[®]

PROMISE:
TARGETING ACCURACY
THAT INSTILLS
CONFIDENCE IN THE BIOPSY



Mammotome[®] MR



Mammotome[®] EX



Mammotome[®] ST

Mammotome[®]



OVER COBRA MEDICAL

Cobra Medical is distributeur van medische hulpmiddelen en apparatuur en levert producten aan ziekenhuizen, facilitaire bedrijven, instellingen en apothekers in Nederland, België en Luxemburg. Als specialist in patiëntvriendelijke oplossingen bieden wij pakketten op het gebied van endoscopie, **radiologie, (borst) biopsie**, urologie en bronchoscopie. Wij beschikken over een goed opgeleid team. Dit team adviseert en begeleidt u bij het gebruik van de apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen. Bij alle medewerkers van onze organisatie staat voortdurend één ding voor ogen: het belang van de patiënt.

COLUMN
Jim Sannes

Sinds de oprichting van Cobra Medical in 1998 hebben we één doel voor ogen: het belang van de patiënt. Dankzij deze filosofie is het bedrijf de afgelopen 13 jaren hard gegroeid. Begin 2011 hebben we een aantal strategische beslissingen genomen en is de basis van het bedrijf versterkt. Naast vele nieuwe toeleveranciers hebben we ook nieuwe verkoopkanalen. Aan de webshop is lang en hard gewerkt: vanaf begin 2012 is de Cobra Medical webshop, met vernieuwde webcatalogus, in de lucht. Ook heeft Cobra Medical een dochter gekregen: Viper Medical. En ook Viper Medical heeft een medische webshop: kijk maar op www.vipermedical.com.

Met 14 medewerkers zijn we een van de meest dynamische bedrijven in deze branche, en daar ligt tegelijkertijd onze kracht. Wij kennen veel van onze klanten persoonlijk, de communicatie is direct en we merken dat dat erg wordt gewaardeerd.

Groot geworden met de verkoop van de MIC-enterale voedingskatheters zijn we er anno 2011 trots op dat we een groot(s) assortiment kunnen presenteren op het gebied van gastro-enterologie, longen, **radiologie en biopsie**.

Cobra Medical heeft zich binnen het vakgebied van de radiologie gespecialiseerd in (borst)biopsie. Onze partners op radiologiegebied zijn (in alfabetische volgorde): Allwin Medical, Biopsy Sciences (HydroMark in België), BIP, Devicor (nieuw!), HS, Medax, Noras MRI Products, Ranfac, Somatex (exclusief in de Benelux!) en Vigeo.

Onze leveranciers hebben niet stilgezeten en producten doorontwikkeld, verbeterd en nieuwe producten in hun assortiment opgenomen. Daarnaast zijn wij er trots op te kunnen melden dat wij een tweetal nieuwe fabrikanten vertegenwoordigen: Somatex en Devicor.

- Op het gebied van nucleaire geneeskunde hebben wij sinds oktober 2011 de vertegenwoordiging van het Neoprobe gammadetectiesysteem van Devicor. Deze gammaprobe wordt gebruikt om de poortwachtklier op te sporen via straling. Uitgebreide uitleg vindt u op pagina 5.
- Tevens zijn wij vanaf 1 oktober 2011 leverancier van het Mammotome biopsieapparaat in de Benelux. Sinds augustus 2011 is de firma Devicor eigenaar van het Mammotome systeem. Uiteraard kunt u ook voor alle toebehoren vanaf nu bij ons terecht.
- Vanaf december 2011 is Cobra Medical exclusief distributeur van het volledige Somatex assortiment in de Benelux. Somatex is in Nederland vooral bekend vanwege de lokalisatiedraden. Maar Somatex biedt zoveel meer! Ontdek het op pagina 5.

u ziet het: ons assortiment blijft groeien!

In deze C.O.B.R.A. presenteren we met trots waar wij als Cobra Medical met z'n allen voor staan. Mocht u meer willen weten, neemt u dan contact met ons op. Want natuurlijk kunt u als vanouds de vertrouwde service verwachten van onze productspecialisten.

INHOUDSOPGAVE

- P 5 • NIEUW BIJ COBRA MEDICAL
- P 6-7 • SOMATEX MRI
- P 8-9 • MAMMOTOME VAN DEVICOR
- P 9 • KLACHTENAFHANDELING
- P 10 • KIMBERLY-CLARK PR/EG-SET
- P 11 • WIST U DAT...
- P 12-13 • MARKEREN
- P 14 • NEOPROBE VAN DEVICOR
- P 15 • BIOPSIE
- P 16 • BIP MAM-O-GUIDE




óók bij Cobra Medical!

De Somatex MRI Chiba-naald is een multifunctionele canule voor het toedienen van medicatie (ten behoeve van pijnbestrijding) en voor toepassing bij FNA-biopsieprocedures. De naald, die voorzien is van centimetermarkering en een dieptestopper, is zeer goed zichtbaar onder MRI dankzij het vernieuwende materiaal, de speciale legering en de bijzonder scherpe tip. *Duidelijk herkenbaar als MRI-versie dankzij markering.*

Chiba-naald voor MRI-geleide procedures

- ✓ Aantrekkelijk geprijsd
- ✓ Zeer stabiel in gebruik
- ✓ Minimaal punctietrauma dankzij superscherpe *ultracut* tip
- ✓ Leverbaar in twee maten: 22 en 20 Gauge
- ✓ Leverbaar in twee lengtematen: 100 en 150 mm

www.cobramedical.nl

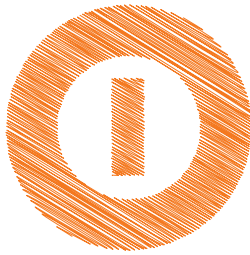

COBRA MEDICAL EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN HET COMPLETE SOMATEX-ASSORTIMENT IN DE BENELUX.



In ons radiologieassortiment hadden wij al de lokalisatie-draden (Duo & Tuloc) en de markers (Tumark & Tumark MRI & Tumark Professional & Tumark Trio & Tumark Flex Mammotome & Tumark Flex ATEC) van Somatex.

Maar vanaf nu verkopen we ook **vertebro-plastiekproducten** en het assortiment **drainageproducten**!



zie ook www.cobramedical.nl/producten/radiologie/vertebroplastiek



zie ook pagina's 7, 11 en 13



MET INGANG VAN 1 OKTOBER 2011 IS COBRA MEDICAL DISTRIBUTEUR VAN DE DEVICOR DIVISION IN DE BENELUX! HIERMEE HEBBEN WIJ ONS ASSORTIMENT UITGEBREID MET DE MAMMOTOME ÉN DE NEOPROBE.



MAMMOTOME EXCLUSIEF BIJ COBRA MEDICAL!

zie ook pagina's 8-9

De Mammotome is een biopsiesysteem voor het nemen van bipten uit de borst. Zo kunnen borstaandoeningen op minimaal invasieve wijze worden gediagnosticeerd. Het systeem is compatibel met verschillende beeldvormende technieken: stereotactie, echografie, MRI of moleculaire beeldvorming. Cobra Medical verkoopt ook naalden in verschillende maten (de meest gebruikte naald is de 11 Gauge) en accessoires als naaldgeleiders, tubing sets en adapters. Daarnaast zijn er diverse markers. Deze zorgen ervoor dat de exacte biopsielocatie tijdens een follow-up eenvoudig terug te vinden is.

Surf voor uitgebreide informatie naar www.cobramedical.nl/producten/borstbiopsie-mammotome

NIEUW BIJ COBRA MEDICAL: NEOPROBE!

zie ook pagina 14

Het Neoprobe-systeem is een **gammadetectiesysteem** dat gammastraling opspoort tijdens een chirurgische procedure. Het is te gebruiken met verschillende soorten radiofarmaca. Het systeem kan worden ingezet voor diverse Sentinel Node procedures en bij een parathyroidectomie, een procedure waarbij de bij schildklieradenomen of abnormale klieren worden verwijderd. De **console** heeft een groot, verlicht display, waardoor de counts goed leesbaar zijn vanuit verschillende hoeken. Bij de console zijn verschillende soorten **probes** leverbaar: een snoerloze probe die werkt via bluetooth-technologie, een **high energy** probe, een laproscopische probe en een probe met snoer. Iedere probe heeft specifieke eigenschappen. U leest er meer over op onze website www.cobramedical.nl, onder het kopje **Producten**, menuoptie **Gammadetectie / Neoprobe**.



VIGEO BIOMARC GOLD MARKER

Kent u onze goudmarker al? Meer informatie staat op onze website, www.cobramedical.nl, onder **Producten / Radiologie / Markers**.

MRI-ASSORTIMENT COMPLEET!



MRI CHIBANAALD

Deze Chibanaald biedt u het gemak van een scherpe ultracut tip gecombineerd met een dieptestopper. Leverbaar in twee gaugematen (22G en 20G) en twee lengtematen: 100 en 150 mm. Uiteraard is de naald voorzien van centimetermarkering.

MRI BIOPSY HANDY

Een lichtgewicht, semi-automatische biopsiegun voor het nemen van histologische soft tissue bipten. Voorzien van een krachtig schietmechanisme.



MRI COAXIAL PUNCTURE NEEDLE

Voor directe puncties, als sheet voor een voerdraad of als punctiegeleider voor de MRI Biopsy Handy. Deze naald heeft een trocar tip en is leverbaar in verschillende maten.



Als geen ander weet Cobra Medical hoe belangrijk het is om met de juiste materialen te werken. Wij hebben gekozen voor de MRI-lijn van Somatex; een uitgebreid assortiment, hoogwaardige bewezen kwaliteit en veilig in gebruik.

Somatex MRI: 'Optimal visibility and maximum strength'

Met het speciale design en het gebruik van hoogwaardig materiaal staan de producten van Somatex garant voor betrouwbaarheid, optimale zichtbaarheid en minimale artefacten.

MRI TUMARK

Tumark MRI-markeersysteem voor precieze, MRI-geleide weefselmarkering. Voorzien van een eenvoudig te bedienen introductiesysteem



MRI TULOC

MRI Tuloc lokalisatiesysteem voor het preoperatief markeren van verdacht weefsel onder MRI-controle. Zowel de draad als de canule zijn MRI-compatibel.




MRI DUO SYSTEM

Lokalisatieset voor de preoperatieve markering van niet-voelbare, verdachte borstklierlaesies. Speciaal geschikt voor toepassingen met MR-controle. De chirurg kan de locatie eenvoudig terugvinden voor de operatie. Met herpositioneerbare lokalisatiedraad.



STRONG PAST.

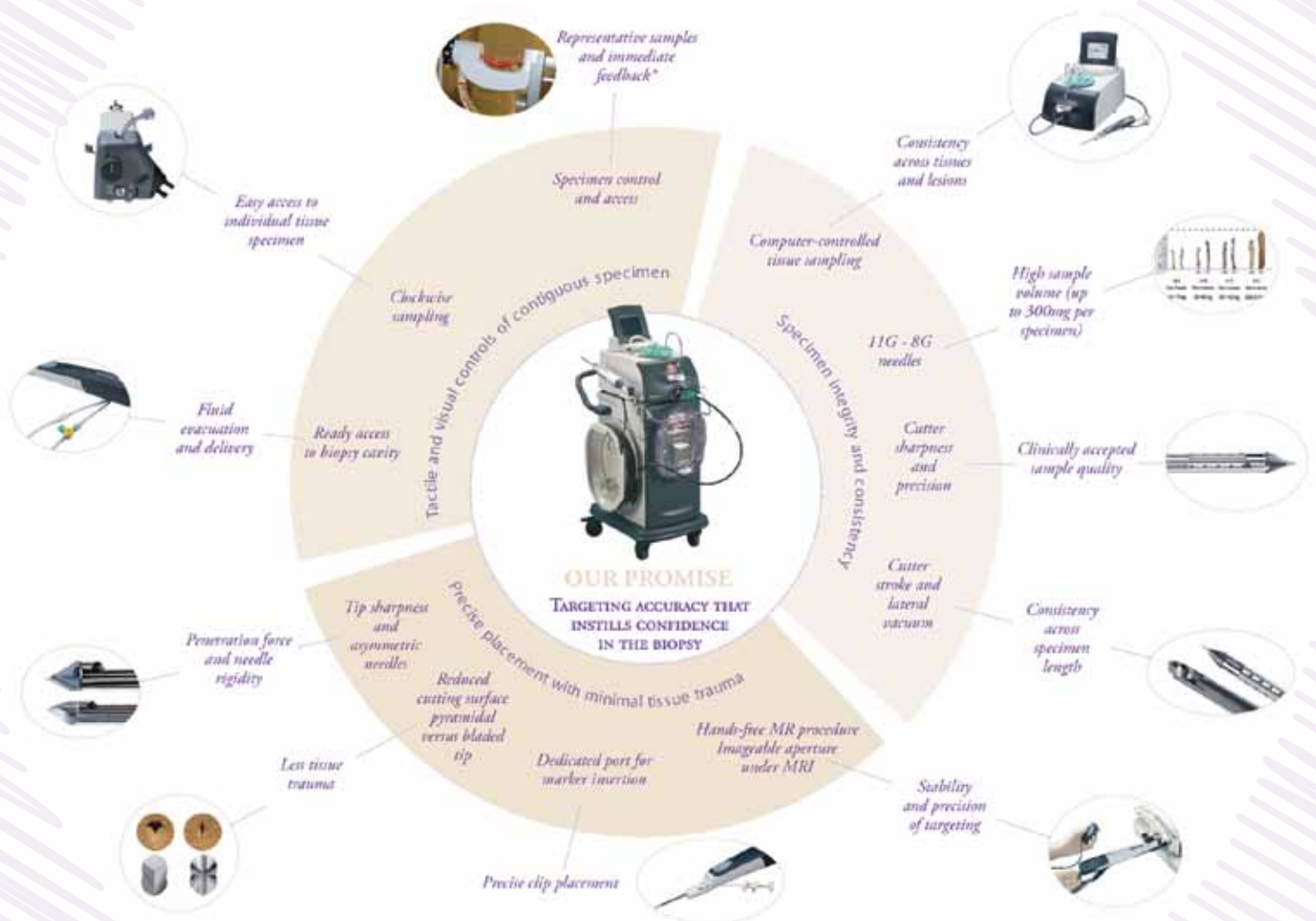

WEBSITE

In deze C.O.B.R.A. informeren wij u in vogelvucht over de nieuwste ontwikkelingen. Alle producten in ons assortiment kunt u uiteraard terugvinden op onze website onder [Producten / Radiologie & Radiologie MRI & Borstbiopsie Mammotome & Detecteren Neoprobe](#). Naast productinformatie opzoeken en beeldmateriaal bekijken kunt u op onze site ook digitale brochures downloaden.


CATALOGUS

Omdat wij weten dat veel artsen liever een catalogus erbij pakken als ze een product nodig hebben, hebben wij onze RADIOLOGIE-catalogus geüpdatet met de nieuwste producten. Mocht u interesse hebben in een exemplaar, dan kunt u een e-mail sturen naar info@cobramedical.nl. We brengen 'm graag bij u langs!

PROMISING FUTURE.

MAMMOTOME BORSTBIOPSIESYSTEEM

Het minimaal-invasieve Mammotome-systeem helpt artsen om nauwkeurige diagnoses te stellen op het gebied van borstkanker. Het systeem biedt een breed scala aan opties en diagnostische instrumenten. Het is hét systeem voor het nemen van bipten door middel van één enkele incisie, waardoor de arts slechts één keer naar de verdachte laesie hoeft te gaan. Bijzonder aan het systeem is het dubbele vacuüm.

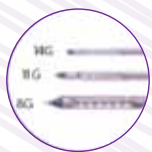

Naalden zijn verkrijgbaar in drie versies: 14 Gauge, 11 Gauge en 8 Gauge.



De innovatieve hoes (Variable Aperture Sleeve) is er voor de Mammotome 11 Gauge en de 8 Gauge-naalden.



De lemmetvormige naaldpunt (*bladed tip*) zorgt voor een soepele naaldintroductie. Dankzij het rechte puntje ontstaat er slechts een klein sneetje, waardoor het eventuele litteken zo klein mogelijk zal zijn.




Het constante vacuümkanaal en het laterale vacuüm dragen positief bij aan de kwaliteit van het bipt. Daarnaast creëren ze toegang tot de biopsieholte en de mogelijkheid om vocht te reguleren.



De klokpositie van de naald kan eenvoudig worden ingesteld middels de draaiknop aan de achterzijde van de naald. Het systeem is voorzien van een extra veiligheidsknop.


KLACHTEN: C STUUR ZE OP!

Cobra Medical is voortdurend op zoek naar innovatieve producten. Ook vinden wij de mening van onze klanten belangrijk als het gaat om ons huidige productassortiment. Onze rol is groot als het gaat om productverbeteringen: wij onderhouden daarom intensieve contacten met producenten en onze leveranciers. Wij brengen leveranciers op de hoogte van de wensen van onze klanten, maar ook van problemen. Klachten nemen wij zeer serieus: wij zien ze als dé kans om een product nóg beter te maken. Dit levert producten op van een hoge kwaliteit en met een groot gebruikersgemak. Daarom is het voor ons heel belangrijk dat u ons informeert als er problemen zijn met een van onze producten. En dat u het product naar ons toe stuurt, zodat wij het naar de fabrikant kunnen sturen voor onderzoek.

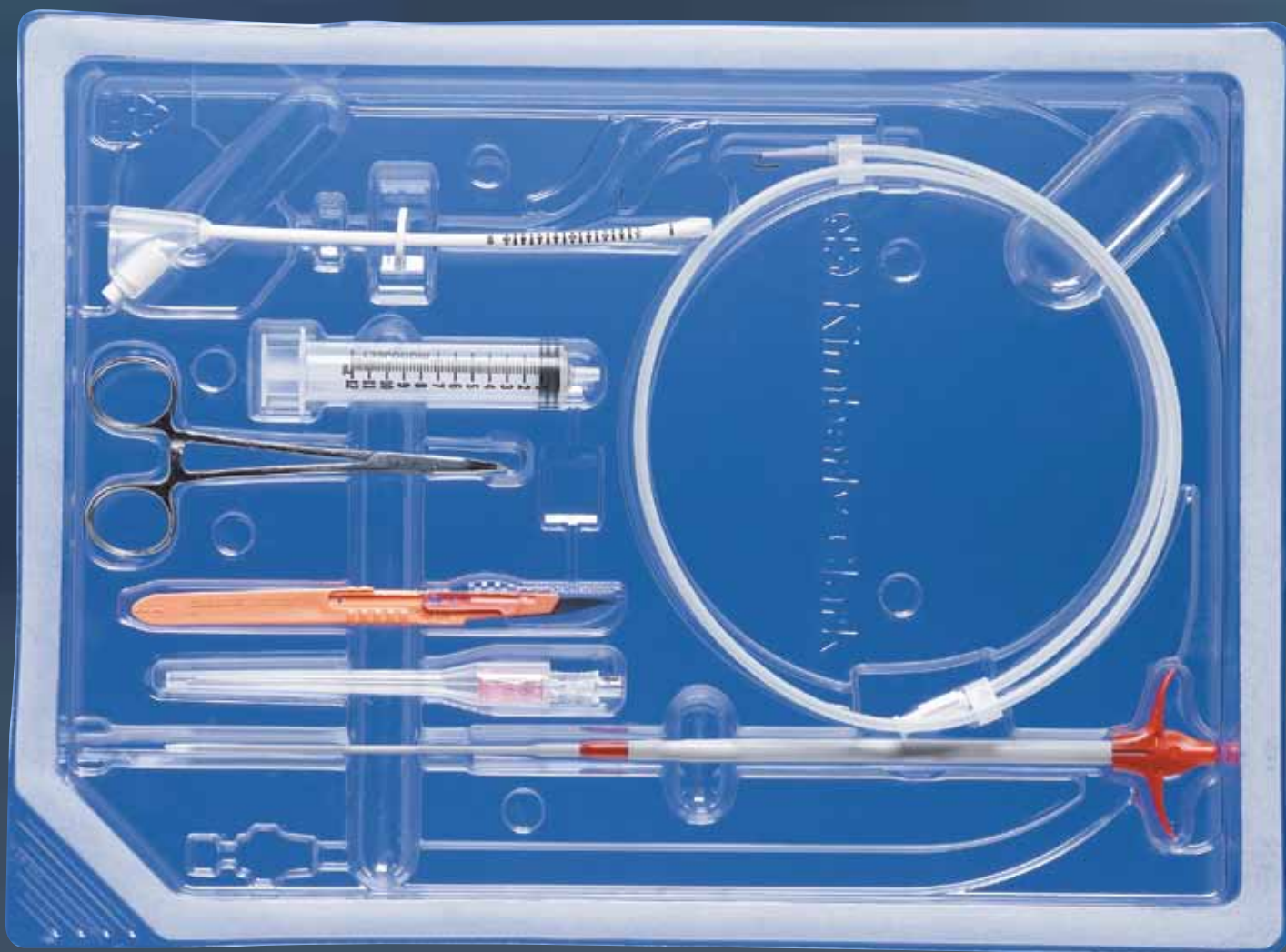

KIMBERLY-CLARK PR/EG-SET


De meest gebruikte methode om een voedingskatheter op de maag of op het jejunum te plaatsen is via een endoscoop (de zogenaamde pull-methode). Voor de categorie patiënten bij wie dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld KNO-patiënten, of niet wenselijk, bijvoorbeeld ALS-patiënten, heeft Kimberly-Clark de PR/EG-set ontwikkeld. Hiermee kunnen ballonkatheters zowel radiologisch als endoscopisch percutaan geplaatst worden. Met name gastrostomiekatheters worden op deze manier geplaatst. Hieronder ziet u in stappen hoe de plaatsing van een 0112-katheter in zijn werk gaat.

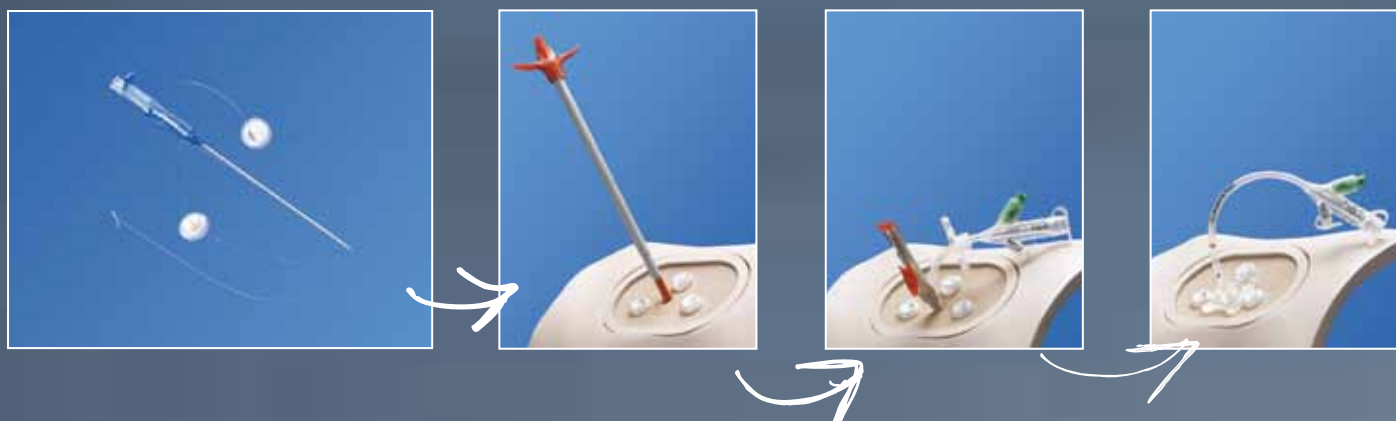

WIST U DAT...



...DE AUTOCUT-NAALDEN
VAN VIGEO
VERNIEUWD ZIJN?

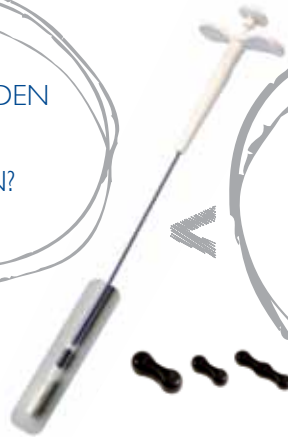

...VIGEO DE BIOMARC HEEFT
AANGEPAST, SPECIAAL VOOR
HET ENCOR-SYSTEEM?

GA NAAR WWW.COBRAMEDICAL.NL
VOOR DE VERNIEUWDE FOLDER
MET DE NIEUWE
ARTIKELNUMMERS.



...COBRA MEDICAL NU
**EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR IS
VAN SOMATEX-PRODUCTEN
IN NEDERLAND?**

... ONS **MRI-ASSORTIMENT COMPLEET**
IS MET PRODUCTEN VAN BIP, NORAS,
DEVICOR/MAMMOTOME EN SOMATEX?

... WIJ VAN DE FIRMA ALLWIN MEDICAL
FASCIALE DILATATOREN LEVEREN?



ARMADA FASCIALE DILATATOREN (AFD-SERIE)

De Armada fasciale dilatatoren worden over de voerdraad
gebruikt, voor de dilatatie van het percutane traject. Ze zijn er
in vele maten, uiteenlopend van 6 French tot en met 16 French.
Daarnaast zijn ze in sets verkrijgbaar.

...COBRA MEDICAL EEN COMPLEET ASSORTIMENT **LOKALISATIEDRADEN** BIEDT,

- VAN BIP → zie achterpagina
- MEDAX
- RANFAC → Keuze uit Breast Marking, Breast Bracketing & Breast Orientation!
- SOMATEX → Somatex Duo & Somatex Tuloc



Medax Sinurep



... ER VAN DE SOMATEX DUO
EN DE SOMATEX TULOC OOK
EEN PREMIUMLIJN VERKRIJG-
BAAR IS, MET LUXE HANDVAT?

Kijk op www.cobra-medical.nl/producten/radiologie/lokaliseren

...COBRA MEDICAL
EEN DOCHTER HEEFT?

VIPER
MEDICAL


zie www.vipermedical.nl



...VIPER MEDICAL OP HET GEBIED
VAN HYGIËNE VEEL HANDIGE
PRODUCTEN VERKOOPT, ZOALS
BIJVOORBEELD SPATBRILLEN EN
OOGPROTECTIESCHILDJES?



Door onze kennis van radiologie weten wij wat de eisen zijn voor een markeersysteem. Cobra Medical is altijd op zoek naar vernieuwingen in de markt en werkt intensief samen met de toeleveranciers en de gebruikers om de producten continue te verbeteren.

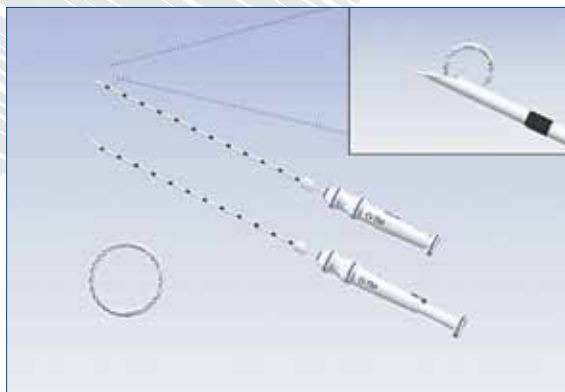

BIP O-TWIST MARKER

De bijzondere ringvorm is direct zichtbaar en onder echografie **ALTIJD** zichtbaar. Markermigratie wordt voorkomen dankzij stevige verankering in het weefsel. Gemaakt van nitinol (biocompatibel). Op drie manieren te gebruiken: rechtstreekse plaatsing, na een vacuümgeassisteerde biopsieprocedure of na een core biopsieprocedure. Niet alleen toepasbaar in combinatie met MRI, maar ook met mammografie, echografie en CT.

De marker met het kleinste artefact van alle beschikbare markers. Zichtbaar onder alle weergavemodaliteiten (onder echografie zelfs permanent). Migreert niet.

Compatibel met de meeste vacuümgeassisteerde borstbiopsieapparaten.



VIGEO BIOMARC

MAMMOMARK & CORMARK

De markers voor het Mammotome-systeem zijn zichtbaar onder mammografie, echo en MRI. Ze zijn compatibel met de Mammotome ST-, EX- en MR-naalden. MammoMARK (en CorMARK) kunnen gebruikt worden in combinatie met vrijwel ieder borstbiopsiesysteem.



SOMATEX MARKERS

- Tumark
- Tumark MRI
- Tumark Professional
- Tumark Trio
- Tumark Flex Mammotome
- Tumark Flex ATEC

Op het gebied van markeren heeft Somatex voor elk systeem een geschikte marker!



SOMATEX LONGMARKER SYSTEEM

- Herpositioneerbaar draadsysteem;
- Stevige verankering door de speciale spiraalvorm.

NIEUW

BIJ COBRA MEDICAL!

UNIEKE PRESTATIES • VRIENDELIJK IN GEBRUIK • COMPATIBEL MET VERSCHILLENDE PROBES

NEOPROBE:

verbetering van oncologische patiëntenzorg door middel van het ontwikkelen van radiofarmaceutische detectieproducten. En daarbij wordt het belang van de patiënt zeker niet vergeten!

Het Neoprobe Gammadetectiesysteem is het middelpunt van de gammageleide chirurgische procedures, zoals het in kaart brengen van de lymfeklieren (ILM - lymfatische 'mapping') en parathyroïdectomie. Dankzij het systeem kunnen complicaties ten gevolge van een complete lymfeklierdissectie worden voorkomen.

BLUETOOTH PROBE

- Superieure gevoeligheid
- Draadloze naald: gebruiksgemak & mobiliteit in de OK
- Twee opties: gehoekte en rechte variant om lichaamscontouren optimaal te kunnen volgen
- Compatibel met de Neoprobe console (versies GDS 2300 & 2200)
- Externe collimator (NPE14)



B I O P S I E

De eisen die aan biopsieapparatuur en biopsie-naalden worden gesteld door ziekenhuis-hygiënisten worden steeds strenger. Zo komt het steeds vaker voor dat reusable biopsie-guns niet langer mogen worden schoongemaakt, maar naar de CSA moeten. Dit is kostbaar! Gelukkig hebben wij disposable biopsie-gun van zeer goede kwaliteit.

Een disposable biopsie-gun uitgelicht

BIP HISTOCORE

De gun heeft niet alleen een heel sterk veermechanisme, maar is prijstechnisch ook interessant. Bovendien kan de BIP HistoCore worden geleverd met coaxiaalnaald. Deze is met één hand los te maken van de gun.



Biopsienaalden voor Promag- en Magnum guns

VIGEO AUTOCUT

Deze biopsienaalden passen bij alle gangbare reusable biopsie-guns, zoals onder andere de **Magnum** en de **Promag 2.2**. Alle naalden zijn uitgerust met een scherpe beveled tip en hebben een extra grote ruimte voor het biopt. De Vigeo Autocut-naalden zijn ook verkrijgbaar met coaxiaalnaald.



Universal



Universal Plus

MEDAX BIOPSIENAALDEN

Van Medax hebben wij de Universal Plus naaldenlijn, die gebruikt kan worden met de Magnum gun. De Medax Universal biopsienaald is compatibel met de Promag gun.



Lokalisatiedraad wordt ingebracht in de borst om de exacte plaats van verdacht weefsel aan te geven. De chirurg kan deze plek lokaliseren en de afwijking uit de borst verwijderen. De Mam-O-Guide van BIP bestaat uit een applicatiecanule en markeringsdraad. Deze lokalisatiedraad is geschikt voor alle beeldvormende technieken: echografie, röntgen en MRI.

- 