


Needle guides • Non-repositionable Breast Localization Needles • Repositionable Breast Localization Needles • Techna-Cut Biopsy Needles System • SKATER™ - Centesis Catheter • Skater Fix & Skin Fix • TCD Drainage Catheters • Hystero-Salpingography Lunderquist Stainless Steel Guidewires • Pointer Nitinol Guidewire • Vascular Dilators • V-stick • Worker Guidewires

ACN™ - Automatic Cutting Needle • BioPince™ • Galactography Kit • Osty-Core™ - Bone Biopsy Needle • Pro-Mag™ Ultra - Tru-Core Biopsy Needles • Ultracore Biopsy Needles SKATER™ • Access Needles Connecting Tubes • Dilators • (HSG) Catheter • Prostate Stabilization Needle Set • Cholangiography Set • Duodenography Catheters & Sets

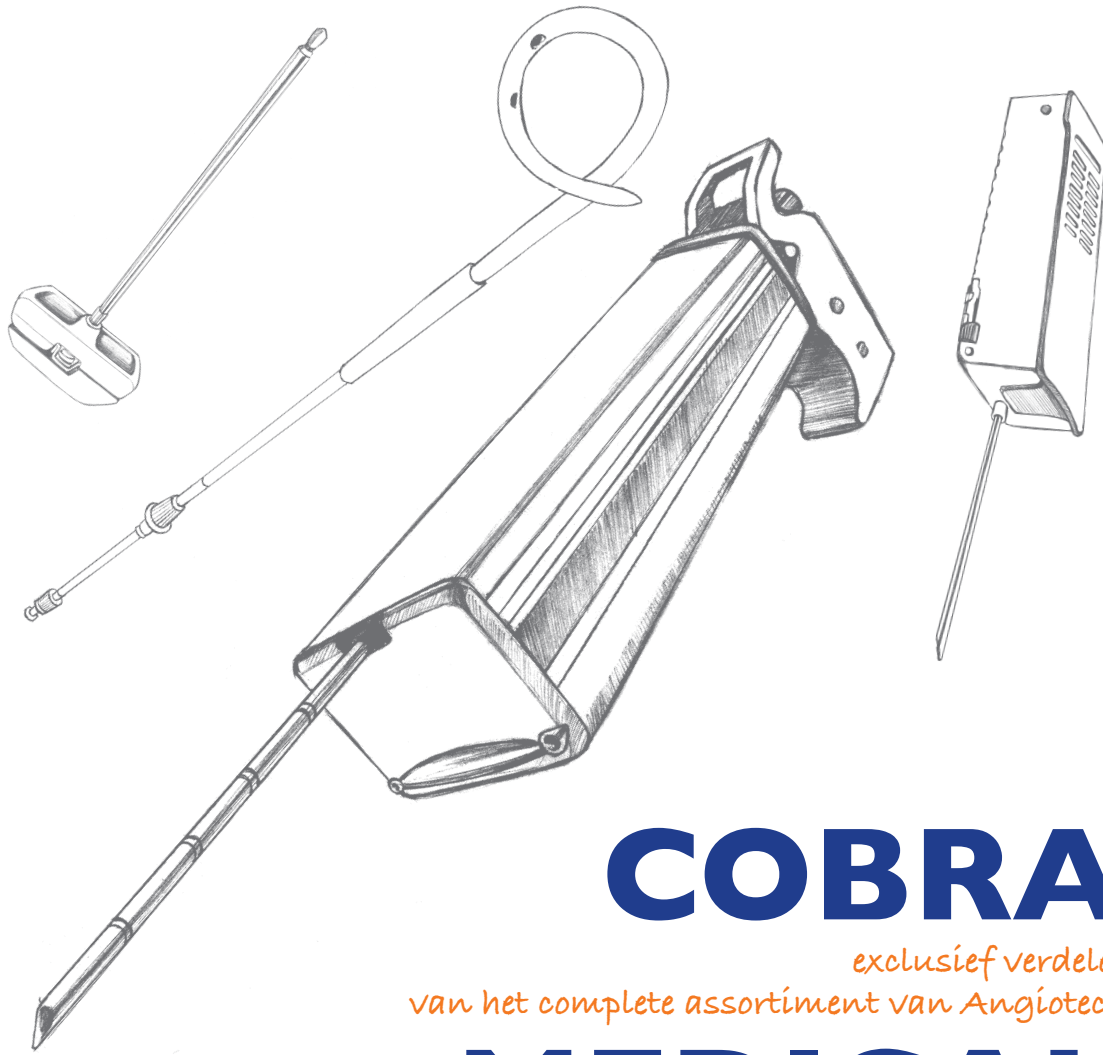

COBRA

exclusief verdeler
van het complete assortiment van Angiotech

MEDICAL

Automatic Biopsy Instrument • SuperCore™ - Biopsy Instrument • T-Lok™ - Bone Marrow Biopsy Needle • Tru-Core™ II - Biopsy Draining Bag • Hawkins Blunt Needle Secess System • Introducer Sheets & Needles • Polyethylene Drainage Catheters & Sets • Entroclysis Catheters • Prostate Seeding Set • Atrieve Vascular Snare™ Kit • V+Pad™ • Access Guidewires •

Instrument • V-Mark™ • Bone Marrow Biopsy Needles • Fine Needle Aspiration Biopsy Needles • MaxiCELL Biopsy Needles • SKATER™ - All Purpose Drainage • SKATER™ - Nephrostomy Drainage • SKATER™ - Biliary Drainage • SKATER™ - Introducer Connecting Tubes High Pressure • DSA Flush catheters • Golden Rule Scaling Catheters • Guidewire Introducer Needles •

WELKOM BIJ COBRA MEDICAL!

Vanaf heden is Cobra Medical **exclusief distributeur** in België voor Angiotech.
Wij zijn er bijzonder fier op dat wij Angiotech mogen vertegenwoordigen.
Angiotech heeft verschillende, uitgebreide assortimenten:

- Vaatheekunde
- Voerdraden
- Drainage
- Accessoires
- Biopsie
- Mammografie
- Speciale Radiologie

De kans is groot dat u nu al producten van Angiotech afneemt: de **Promag biopsiegun** is een van de bekendste producten. Andere 'succesnummers' zijn de drainageproducten uit het **Skater**-assortiment, de **T-Lok** botboringsnaald en de **BioPince** voor het nemen van mooie, grote biopten.

WAT VERANDERT ER VOOR U?

Indien u uw Angiotech-producten bestelde bij de firma Medikor in Nederland, dan verzoeken wij u om de leveranciersgegevens in uw bestelsysteem te wijzigen in:

Cobra Medical B.V.

Stavangerweg 21-14
9723 JC Groningen
Nederland
Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland

Onze gegevens in België:

T. 070 66 05 70
F. 070 66 05 72
E. info@cobramedical.be
www.cobramedical.be



Wij verbinden ons ertoe om, in de mate van het mogelijke, de prijsafspraken die u voor deze producten heeft te respecteren.



Cobra Medical is een medisch bedrijf dat hulpmiddelen en apparatuur levert aan ziekenhuizen, facilitaire bedrijven, instellingen en apothekers in Nederland, België en Luxemburg. Wij leveren een breed assortiment producten en hulpmiddelen op het gebied van de **gastro-enterologie** (inclusief **enterale voeding**), **radiologie**, (**borst-**)**biopsie**, **longgeneeskunde** / **bronchoscopie**, **nucleaire geneeskunde**, **urologie** en **vertebroplastiek**.

SERVICE STAAT BIJ ONS VOOROP

Bij alle medewerkers van onze organisatie staat voortdurend één ding voor ogen: het belang van de patiënt. Service gaat verder dan de levering van onze producten. Eigenlijk begint het dan pas!

MEDEWERKERS MET KENNIS VAN ZAKEN

Wij beschikken over een goed opgeleid team. Dit team adviseert en begeleidt u bij het gebruik van de apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen. Onze buitendienstmedewerkers begeleiden plaatsingen en procedures. Zij zijn vraagbaak, omdat zij een medische achtergrond hebben met een ruime werkervaring. Hun kennis wordt úw kennis. En uiteraard staan onze binnendienstmedewerkers u graag telefonisch te woord.

SCHOLING EN VOORLICHTING

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over onze producten, zodat we u een optimaal gebruik kunnen garanderen. Om u van de juiste informatie te voorzien, bieden we scholings- en voorlichtingsbijeenkomsten op maat aan. Ook begeleiden we specialisten die onze producten voor het eerst gaan gebruiken en organiseren we klinische lessen.

VERNIEUWEND EN INNOVATIEF

Wij willen graag weten welke ervaringen u als specialist heeft, om zo onze voorlichting optimaal af te stemmen op uw vragen. Zo krijgt de patiënt -én u als specialist- door het doorspelen van uw wensen en verbeteringen een optimaal product. Daarnaast zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe producten en oplossingen die voordelen bieden voor de patiënt en voor u. Dit doen we door intensief contact met de fabrikanten te onderhouden en steeds de nieuwste trends op te volgen. Op die manier bieden wij de garantie voor een zo optimaal mogelijk assortiment, met volop keuze voor u, binnen de verschillende productsegmenten.

OPTIMAAL RENDEMENT

Omdat onze producten kwalitatief hoogwaardig zijn en hun doel bereiken, zijn ze kostenbesparend. Deze kwalitatief hoogwaardige producten vergroten het gebruikersgemak voor u en het comfort en resultaat voor de patiënt.

SNEL CONTACT

De lijnen zijn kort en het is goed communiceren met ons. Zo maakt een snelle levering snel inspelen op uw wensen mogelijk.



Angiotech SA maakt onderdeel uit van de internationale Angiotech Group, met het hoofdkantoor in Vancouver, Canada. Het uitgebreide portfolio van klinische producten is speciaal bedoeld voor interventieradiologen, urologen, oncologen en gastro-enterologen.

HOE KAN IK BESTELLEN BIJ COBRA MEDICAL?

- Uw bestellingen ontvangen wij graag via **order@cobramedical.com** of via ons Belgische faxnummer **070 66 05 72**.
- Wij berekenen € 12,50 verzendkosten indien het totale orderbedrag lager is dan € 250,00.
- Om te voorkomen dat u verzendkosten moet betalen, bundelen wij uw orders voor u. Dit betekent dat wij gedurende de week uw orders voor u verzamelen totdat uw totale bestelbedrag € 250,00 of meer bedraagt. Op dat moment versturen wij uw bestelling. Indien uw totale bestelbedrag in de loop van de week niet een waarde van € 250,00 bereikt, verwerken wij uw order(s) **op donderdag** en zijn wij genoodzaakt om € 12,50 transportkosten in rekening te brengen.
- Bestellingen die op werkdagen (maandag t/m vrijdag) vóór 12.00 uur binnenkomen, nemen wij dezelfde dag nog in behandeling mits het orderbedrag boven de € 250,00 ligt.
- Is het orderbedrag lager dan € 250,00 en kunt u niet wachten tot verzending op donderdag? Uiteraard kunnen wij, **na telefonisch overleg**, uw order direct in behandeling nemen. Wij berekenen dan € 12,50 verzendkosten aan u door.
- Wij versturen uw bestellingen per post. Post NL werkt in België samen met DPD en de postdivisie van TNT België. De overkomstduur kunnen wij niet garanderen, maar de ervaring leert dat u zeker moet rekenen op 1 à 3 werkdagen. Let op! In sommige delen van België worden pakketten niet op zaterdag of op maandag bezorgd.
- Heeft u uw zending zo snel mogelijk nodig? **Neemt u bij speedorders altijd telefonisch contact** met ons op. Wij zoeken voor u uit hoe snel u uw order kunt ontvangen en wat de kosten van de koerierszending zijn. Na goedkeuring uwerzijds over de expres-kosten wordt uw bestelling verzonden en berekenen wij de werkelijke koerierskosten aan u door.

EEN VOORBEELD VAN ONZE ORDERBUNDELSERVICE?



Op vrijdag ontvangen wij van u een bestelling ter waarde van € 200,00. Dit is minder dan € 250,00. Wij bewaren de order in een verzamelmap. Op dinsdag vóór 12.00 uur plaatst u een bestelling ter waarde van € 100,00. Uw totale bestelbedrag bedraagt nu meer dan € 250,00. Wij ronden op dinsdag uw bestelling af en er worden géén verzendkosten berekend.



KENT U DE PRODUCTEN VAN ANGIOTECH NOG NIET?

Dan zult u zeer zeker geïnteresseerd zijn om het assortiment te ontdekken! Op www.cobramedical.be vindt u uitgebreide productbeschrijvingen, de mogelijkheid om folders te downloaden, afbeeldingen van de verschillende producten, enzovoort.

Om u alvast een voorproefje te geven, stellen wij op de volgende pagina's de vier meest verkochte producten aan u voor.

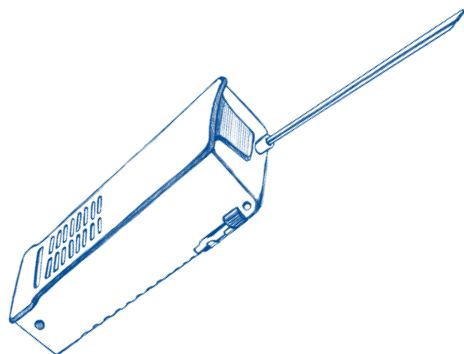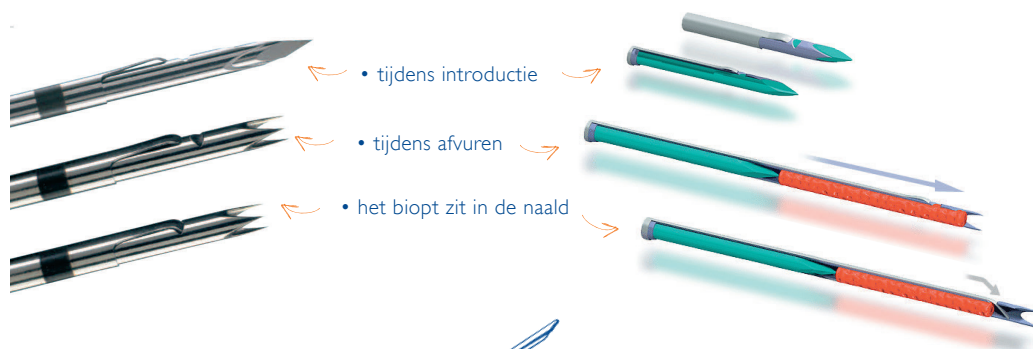


BIOPINCE™ FULL-CORE BIOPSIE-INSTRUMENT


Met de BioPince™ kunnen bipten worden genomen ten behoeve van klinische diagnostiek. De BioPince™ is voorzien van een 'triaxiaal' canulesysteem: met de drie vlijmscherpe 'tanden' aan de voorzijde worden perfecte, volledig cilindrische bipten genomen (wat een voordeel is ten opzichte van bestaande Tru-Cut systemen met zijopening, waarbij het biopt aan de één zijde is afgevlakt). De kans op kneuzing van het staal en fragmentatie van het weefsel zijn minimaal. Dankzij de 'Cut & Capture'-techniek wordt het biopt in de naald vastgehouden.

Eigenschappen & Voordelen

- Het biopt is groot en volledig cilindrisch (zie figuur 1), met als voordeel dat het tot 59% meer weefsel bevat (figuur 2 toont een biopt genomen met een traditioneel full-core biopsie-instrument met zijopening);
- Keuze uit variabele 'throw'-lengtes:
 - De 13 mm-variant resulteert in een biopt met een lengte van 9 mm;
 - De 23 mm-variant resulteert in een biopt met een lengte van 19 mm;
 - De 33 mm-variant resulteert in een biopt met een lengte van 29 mm.
- De BioPince™ kan worden gebruikt in combinatie met coaxiale introductieaalden;
- Patiëntvriendelijk;
- Keuze uit 18- en 16 Gauge-naalden;
- Voorzien van centimetermarkeringen, voor een precieze dieptepositionering;
- Lichtgewicht & eenvoudig in gebruik. Daardoor zeer geschikt voor CT-geleide procedures.

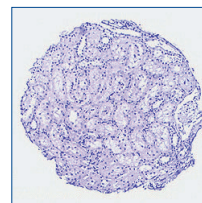


figuur 1
Full-core biopt
met BioPince™

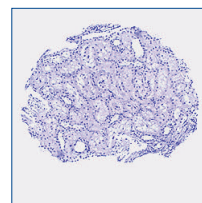

figuur 2
Biopt genomen met
traditioneel biopsie-
instrument met
zijopening


Demonstratiefilm

Op onze website www.cobramedical.be, onder **Producten / Biopsie / Biopsie guns** vindt u meer informatie over de BioPince, evenals een filmpje dat toont hoe het product werkt.

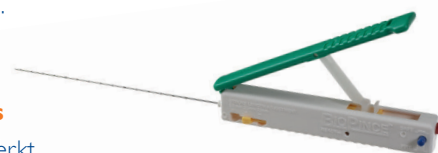

PRO-MAG™ ULTRA AUTOMATISCH BIOPSIE-INSTRUMENT

De Pro-Mag™ Ultra automatisch gun is een reusable instrument dat wordt gebruikt met disposable naalden. Met de gun worden bipten van hoge kwaliteit genomen ten behoeve van histologisch onderzoek.

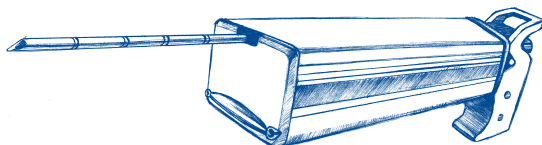

Eigenschappen & Voordelen

- Voorzien van een 'throw advancement' van 25 mm;
- De trekker kan gemakkelijk worden overgehaald vanaf de voor- of achterzijde van het instrument;
- Voorzien van ingebouwde beveiliging die automatisch wordt geactiveerd, waardoor de gun niet per ongeluk afgaat;
- Biopt kan eenvoudig uit de naald worden genomen, zonder dat de naald uit de gun hoeft te worden gehaald;
- De gun kan op de normale wijze worden gesteriliseerd.



Angiotech heeft ook disposable naalden in het assortiment, speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de Pro-Mag™ Ultra-gun. De naalden zijn voorzien van centimetermarkeringen voor een precieze dieptepositionering en hebben een echogene tip, voor een nauwkeurige positionering onder echoscopische begeleiding. Optioneel zijn er coaxiale introductienaalden verkrijgbaar.

Pro-Mag™ Ultra biopsienaalden





Deze hebben een sample notch van 19 mm, waardoor de bipten voldoende groot zijn voor diagnose. Bovendien zijn naaldspacers niet nodig dankzij het speciale ontwerp.



ACN™ biopsienaalden




Speciaal ontwikkeld voor gebruik met het Pro-Mag™ 2.2 automatisch biopsie-instrument. Deze hebben een sample notch van 17 mm.



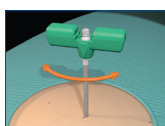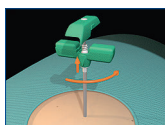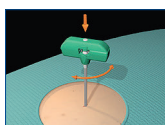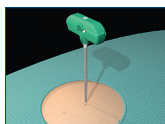

T-LOK™ BONE MARROW BIOPSIENAALDEN

Met de T-Lok™ biopsienaald kunnen op eenvoudige wijze kwalitatief goede biopten worden genomen uit beenmerg. Dankzij het revolutionaire ontwerp van de T-Lok extractiecanule wordt het afgenomen beenmerg veilig in de naald 'vastgehouden', zonder dat de structuur van het biopt wordt aangetast.

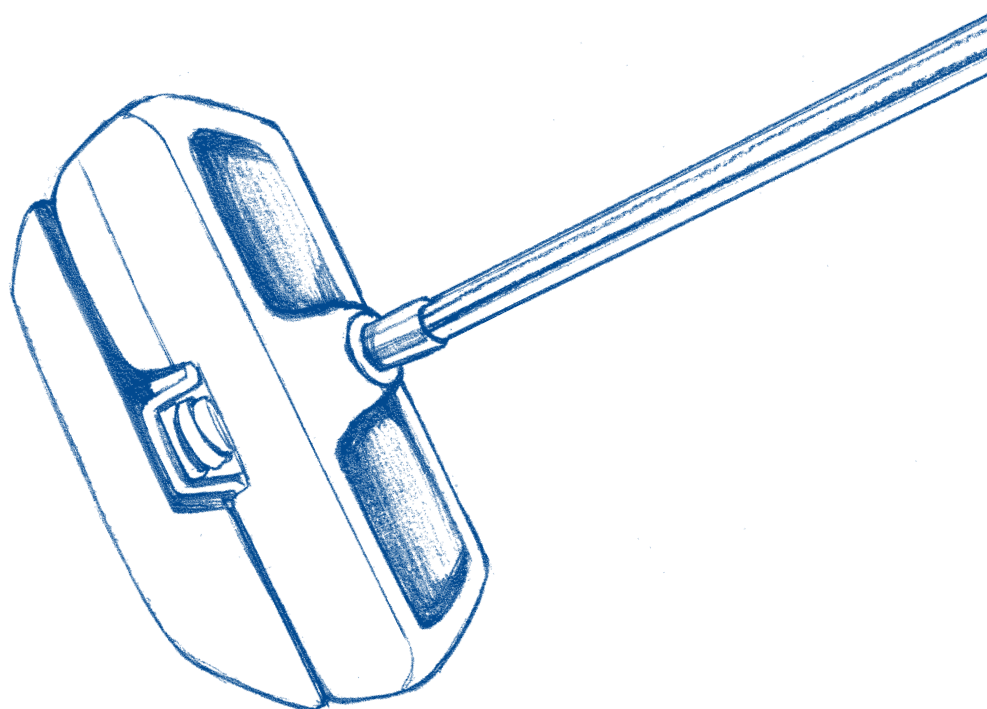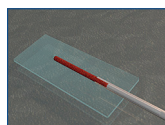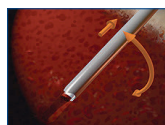




Eigenschappen & Voordelen

- Eenvoudig in gebruik;
- Patiëntvriendelijk;
- Voorzien van ergonomisch 'twist-lock' handvat voor optimale grip;
- Unieke, dubbele diamantvormige stylet tip garandeert eenvoudige introductie in hard bot;
- Risico van beschadiging of verloren gaan van het biopt is klein, dankzij het revolutionaire en innovatieve ontwerp van de T-Lok™ extractiecanule, waarbij het beenmerg veilig in de naald wordt opgevangen en afgesloten;
- Met name geschikt voor het afnemen van beenmerg bij patiënten met multipel myeloom (ook wel de ziekte van Kahler genoemd);
- Met de T-Lok™ behoort de pijnlijke methode, waarbij de naald moet worden gebogen om een goed biopt te kunnen nemen, tot het verleden.

Demonstratiefilm

Op onze website www.cobramedical.be, onder

Producten / Biopsie / Beenmergbiopsie vindt u meer informatie over de T-Lok, evenals een filmpje dat toont hoe het product werkt.


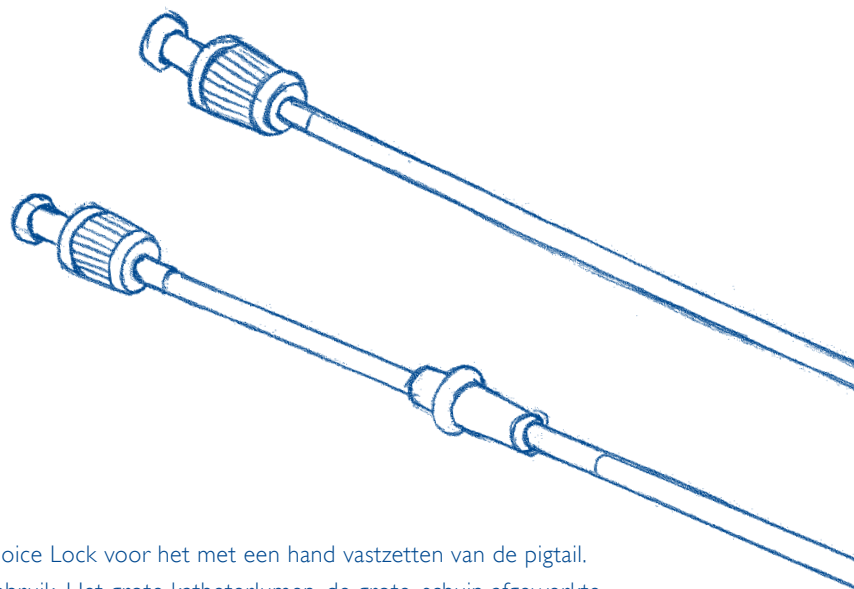


SKATER™ DRAINAGEKATHETERS

Er zijn zes soorten Skater-producten:

1. **SKATER™ One Step drainagekatheter** met Choice Lock voor het met een hand vastzetten van de pigtail. Geschikt voor diverse toepassingen. Simpel en veilig in gebruik. Het grote katheterlumen, de grote, schuin afgewerkte drainageopeningen en de grote lumennaaf zorgen voor optimale doorstroom en drainage en voorkomen verstopping van de katheter. Voordelen voor de patiënt: draagcomfort, knikbestendig polyurethaan, eenvoudig in te brengen dankzij de HYDROFEEL®-coating en aanslagvormingbestendig. U heeft de keuze uit een katheter waarvan de pigtail niet vastgezet kan worden, en een variant met een afbreekbaar trekclipje, waarmee de katheter in de krulvorm vergrendeld kan worden.
2. **SKATER™ Nefrostomiedrainagekatheter** voor de drainage van urine uit de nier. De katheter is gemaakt van zacht polyurethaan, en dus knikbestendig en patiëntvriendelijk. Dankzij het stevige pigtail-ontwerp blijft de vorm behouden en blijft de katheter stevig op zijn plaats zitten in het nierbekken. Ontworpen voor de Seldingertechniek. Hydrofiele coating zorgt voor gemakkelijke katheterplaatsing. Uitneembare pigtail-stretcher.
3. **SKATER™ Drainagekatheter** van zacht polyurethaan, dat knikbestendig is en ervoor zorgt dat de de katheter terugveert naar de oorspronkelijke vorm. De katheter heeft een SLIP-COAT™ hydrofiele coating op het distale gedeelte, wat het inbrengen vereenvoudigt. De grote, ovale drainageopeningen en het grote lumen staan garant voor een optimaal drainagevermogen. U heeft de keuze uit een katheter waarvan de pigtail niet vastgezet kan worden, en een variant met een afbreekbaar trekclipje, waarmee de katheter in de krulvorm vergrendeld kan worden.
4. **SKATER™ Galdrainagekatheter (Biliary Drainage katheter)** wordt gebruikt voor de drainage van gal uit de galgang en worden geplaatst middels de Seldingertechniek. De laatste drainageopening is voorzien van een radio-opake markeerring, voor een nauwkeurige positionering in de ductus. Het zachte polyurethaan voorkomt knikken en zorgt ervoor dat de katheter altijd weer terugveert in de oorspronkelijke vorm. Inbrengen verloopt soepel dankzij de HYDROFEEL® coating. De grote, ovale drainagegaten en het grote lumen zorgen voor een maximaal drainagevermogen. Uitneembare pigtail-stretcher.

5. **SKATER™ Kits**, waaronder een nefrostomieset met een vastzetbare pigtail-katheter of een versie met een katheter die niet vergrendeld kan worden, een SKATER™ nefrostomie introductieset en een SKATER™ biliaire introductieset met vastzetbare pigtail voor het plaatsen van een galkatheter.
6. **SKATER™ Centesekatheter**, ontworpen voor percutane vochtaspiratie en het draineren van kleine hoeveelheden vocht. Dankzij het ventiel kan, tijdens het inbrengen, lucht uit de katheter ontsnappen en wordt de arts beschermd tegen vochtlekage. Luer-lock introductienaald voor een eenvoudige plaatsing met een hand. Holle stylet maakt vochtaspiratie voorafgaand aan het uitnemen van de stylet mogelijk. Echogene naaldtip zorgt voor goed beeld bij plaatsing onder echografie. Dankzij de taps toelopende katheterpunt is een goede overgang tussen katheter en naald verzekerd, waardoor het inbrengen soepel verloopt. Vier gaatjes aan de zijkant van de distale katheterpunt maken drainage in kleine holten mogelijk.

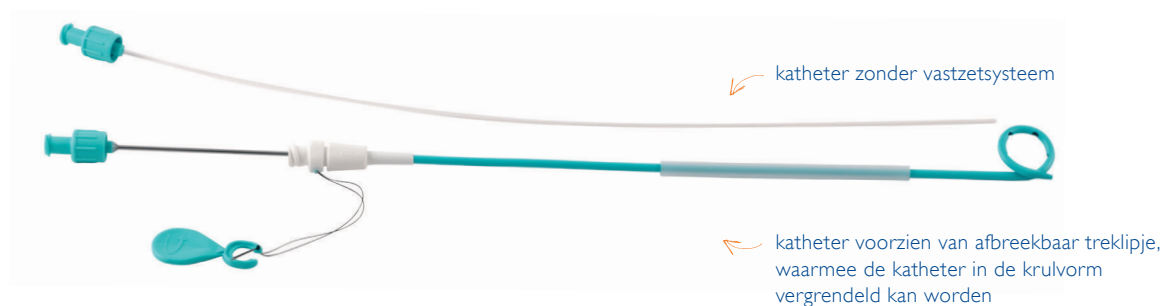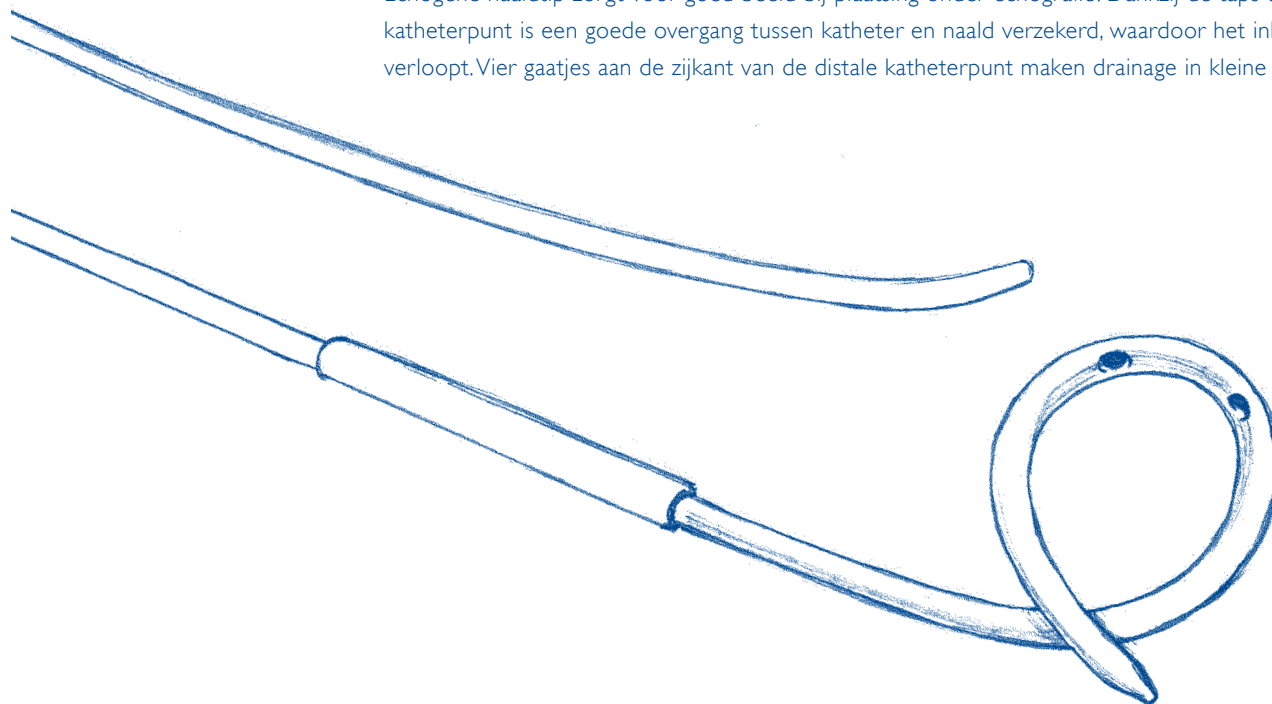




Cobra Medical BV
Stavangerweg 21-14
9723 JC Groningen
Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
Tel.: 070 66 05 70
Fax: 070 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be

Biopsy
Drainage
Vascular
HSG &
Prostate

Needle guides • Non-repositionable Breast Localization Needles • Repositionable Breast Localization Needles • Techna-Cut Biopsy Needles System • SKATER™ - Centesis Catheter • Skater Fix & Skin Fix • TCD Drainage Catheters • Hystero-Salpingography Lunderquist Stainless Steel Guidewires • Pointer Nitinol Guidewire • Vascular Dilators • V-stick • Worker Guidewires

ACN™ - Automatic Cutting Needle • BioPince™ • Galactography Kit • Osty-Core™ - Bone Biopsy Needle • Pro-Mag™ Ultra - Tru-Core Biopsy Needles • Ultracore Biopsy Needles SKATER™ • Access Needles Connecting Tubes • Dilators • (HSG) Catheter • Prostate Stabilization Needle Set • Cholangiography Set • Duodenography Catheters & Sets

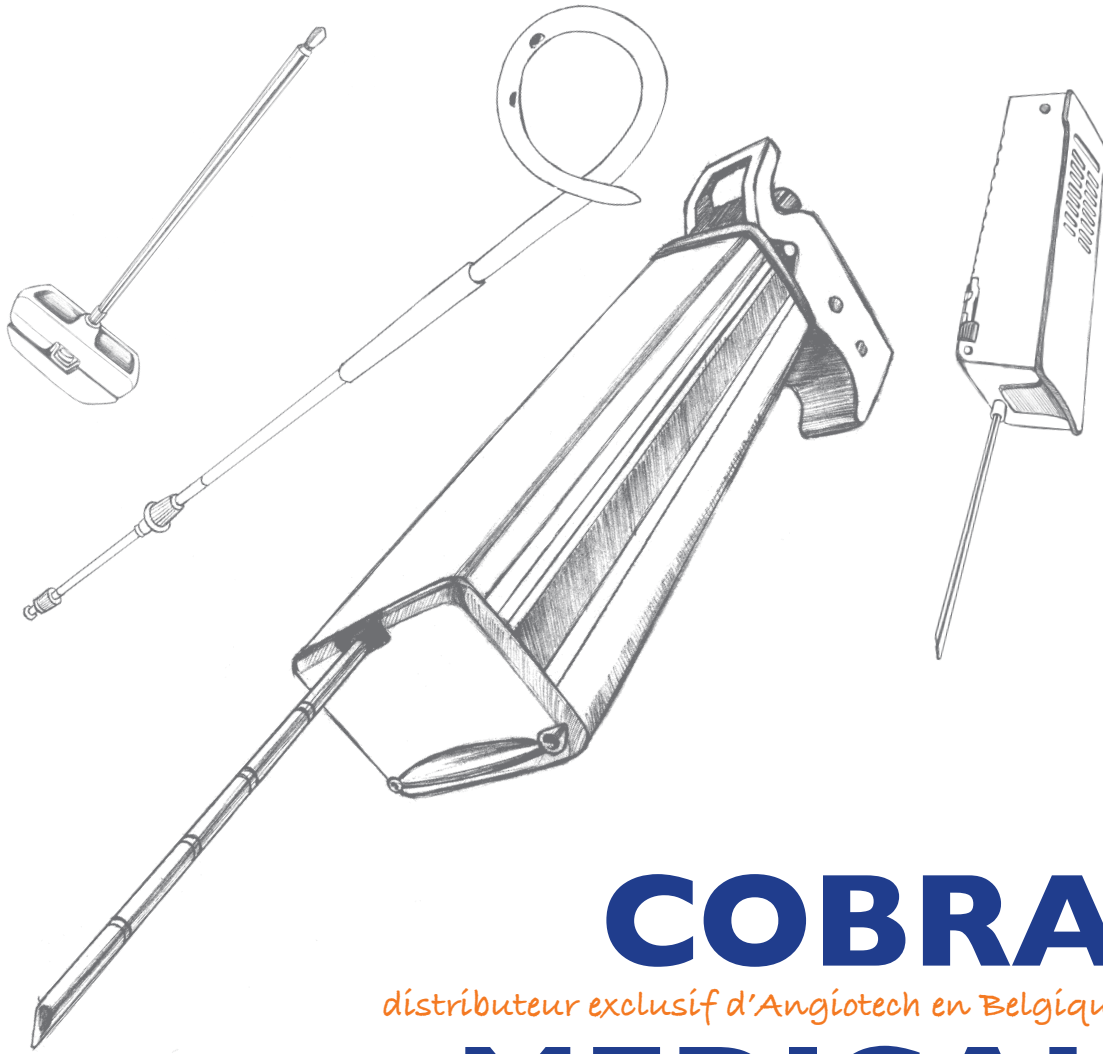

Automatic Biopsy Instrument • SuperCore™ - Biopsy Instrument • T-Lok™ - Bone Marrow Biopsy Needle • Tru-Core™ II - Biopsy Draining Bag • Hawkins Blunt Needle Sccess System • Introducer Sheets & Needles • Polyethylene Drainage Catheters & Sets • Entroclysis Catheters • Prostate Seeding Set • Atrieve Vascular Snare™ Kit • V+Pad™ • Access Guidewires •

Instrument • V-Mark™ • Bone Marrow Biopsy Needles • Fine Needle Aspiration Biopsy Needles • MaxiCELL Biopsy Needles • SKATER™ - All Purpose Drainage • SKATER™ - Nephrostomy Drainage • SKATER™ - Biliary Drainage • SKATER™ - Introducer Connecting Tubes High Pressure • DSA Flush catheters • Golden Rule Scaling Catheters • Guidewire Introducer Needles •

COBRA distributeur exclusif d'Angiotech en Belgique MEDICAL

BIENVENUE CHEZ COBRA MEDICAL!

À compter d'aujourd'hui, Cobra Medical est le **distributeur exclusif** d'Angiotech en Belgique. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir représenter Angiotech. Angiotech propose une gamme complète :

- Chirurgie vasculaire
- Fils-guides
- Drainage
- Accessoires
- Biopsie
- Mammographie
- Radiologie spéciale

Il est probable que vous achetiez déjà des produits Angiotech: le **pistolet biopsique Promag** est l'un des produits les plus connus. Parmi les autres « réussites » d'Angiotech, citons les produits de drainage de l'assortiment **Skater**, l'aiguille à biopsie osseuse **T-Lok** et la **BioPince** pour la réalisation de prélèvements importants et représentatifs.

CE QUI CHANGE POUR VOUS...

Si vous commandez vos produits Angiotech auprès de l'entreprise Medior aux Pays-Bas, nous vous demandons de changer les coordonnées du fournisseur des produits Angiotech dans votre système:

Cobra Medical B.V.

Stavangerweg 21-14
9723 JC Groningue
(Pays-Bas)
Boîte Postale 5153
9700 GD Groningue
(Pays-Bas)

Nos coordonnées en Belgique:

Tél: 070 66 05 70
Fax: 070 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be



Nous nous engageons, dans la mesure du possible, à respecter les accords de prix que vous avez conclus pour ces produits.



Cobra Medical est une entreprise médicale qui fournit des accessoires et des appareils aux hôpitaux, aux services techniques, aux institutions et aux pharmaciens, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Nous fournissons une large gamme de produits et d'accessoires dans les domaines de la gastro-entérologie (y compris nutrition entérale), de la radiologie, de la biopsie (du sein), de la pneumonologie/bronchoscopie, de la médecine nucléaire, de la vertébroplastie et de l'urologie.

LE SERVICE EST NOTRE PRIORITÉ

L'ensemble de nos collaborateurs garde constamment une chose à l'esprit : l'intérêt du patient. Notre service va plus loin que la simple livraison de nos produits. En réalité, c'est là qu'il commence!

DES COLLABORATEURS COMPÉTENTS

Nous disposons d'une équipe bien formée. Celle-ci vous conseille et vous accompagne dans l'utilisation de nos appareils et de leurs accessoires. Nos responsables de secteur supervisent les installations et les procédures. Leur formation médicale et leur vaste expérience professionnelle leur permettent de répondre à toutes vos questions. Leurs connaissances deviennent ainsi vos connaissances.

Nos assistants commerciaux se tiennent également à votre disposition pour répondre à vos appels téléphoniques.

FORMATIONS ET SESSIONS D'INFORMATION

Il est important pour nous de bien vous informer sur nos produits, afin de pouvoir vous en garantir une utilisation optimale. Nous proposons donc de vous fournir des informations adéquates par le biais de sessions de formation et d'information sur mesure. Nous assistons également les spécialistes dans leur première utilisation de nos produits et organisons des enseignements en milieu clinique.

SOCIÉTÉ INNOVATRICE

En tant que spécialiste, vos expériences pratiques nous intéressent. Nous pouvons ainsi répondre à vos questions de façon optimale lors de nos sessions d'information. En nous communiquant vos souhaits et vos points d'améliorations, vous nous permettrez de proposer un produit optimal, aussi bien pour le patient que pour vous en tant que spécialiste.

De plus, nous sommes constamment à la recherche de nouveaux produits et de nouvelles possibilités, offrant des avantages au patient, tout comme au spécialiste. À cet effet, nous entretenons des relations étroites avec les fabricants et nous efforçons de suivre au plus près les tendances du marché. Nous vous garantissons ainsi un assortiment aussi optimal que possible, vous offrant un choix complet au sein de diverses catégories de produits.

RENDEMENT OPTIMAL

En vous proposant des produits efficaces et de haute qualité, nous vous permettons de réaliser des économies. Votre utilisation en est aussi facilitée et le confort et résultat pour le patient améliorés.

CONTACT RAPIDE

Nous restons à votre écoute ! Nos lignes de communication sont courtes, ce qui nous permet de répondre rapidement à vos besoins.




Angiotech SA fait partie du groupe international Angiotech, dont le siège est établi à Vancouver, Canada. Le large portefeuille de produits cliniques est spécialement destiné aux radiologues interventionnistes, aux urologues, aux oncologues et aux gastroentérologues.

COMMENT PUIS-JE PASSER UNE COMMANDE AUPRÈS DE COBRA MEDICAL ?

- Nous vous prions de passer vos commandes via **order@cobramedical.com** ou via notre numéro de fax en Belgique **070 66 05 72**. **Attention!** Il n'est pas nécessaire d'ajouter le code international '+31' ou '+32'.
- Nous facturons 12,50 € de frais d'expédition pour toutes commandes inférieures à 250,00 €.
- Afin de vous éviter de payer des frais d'expédition, nous groupons vos commandes pour vous. Cela signifie que nous rassemblons vos commandes de la semaine jusqu'à ce que leur montant total atteigne 250,00 € ou plus. Nous expédions vos commandes à ce moment-là. Si vos commandes de la semaine ne dépassent pas 250,00 €, nous les traitons le **jeudi** et sommes dans l'obligation de vous facturer 12,50 € de frais d'expédition.
- Les commandes qui nous parviennent les jours ouvrables (du lundi au vendredi inclus) avant 12h00, sont traitées le jour même **à condition que leur montant soit supérieur à 250,00 €**.
- Votre commande ne dépasse pas 250,00 € et vous ne pouvez pas attendre son expédition le jeudi ? **Après accord téléphonique**, nous pourrions évidemment traiter votre commande au plus tôt ! Nous vous facturerons alors 12,50 € de frais d'expédition.
- Nous expédions vos commandes par la poste. Post NL transfère les colis en Belgique à DPD ou TNT Belgique. Nous ne pouvons garantir les délais de livraison, mais savons par expérience que vous devez compter 1 à 3 jours ouvrables. Attention ! Dans certaines régions de Belgique, aucun colis n'est livré le samedi ou le lundi.
- Avez-vous besoin de votre commande **le plus rapidement possible** ? En cas de commande en urgence, veuillez **toujours prendre contact avec nous par téléphone**. Nous recherchons pour vous la façon la plus rapide de vous faire parvenir vos produits et les coûts liés à l'envoi par coursier. Après accord de votre part en ce qui concerne les frais d'envoi express par coursier, votre commande vous sera expédiée et nous vous facturerons les frais d'envoi réels.

UN EXEMPLE DE NOTRE SERVICE DE GROUPEMENT DE COMMANDES ?


Nous recevons un vendredi votre commande d'un montant de 200,00 €. Nous conservons cette commande dans un dossier de groupement. Le mardi suivant avant 12h00, vous passez une commande d'un montant de 100,00 €. Le total de ces deux commandes dépasse les 250,00 €. Nous traitons alors vos commandes le mardi et ne vous facturons pas de frais d'expédition.

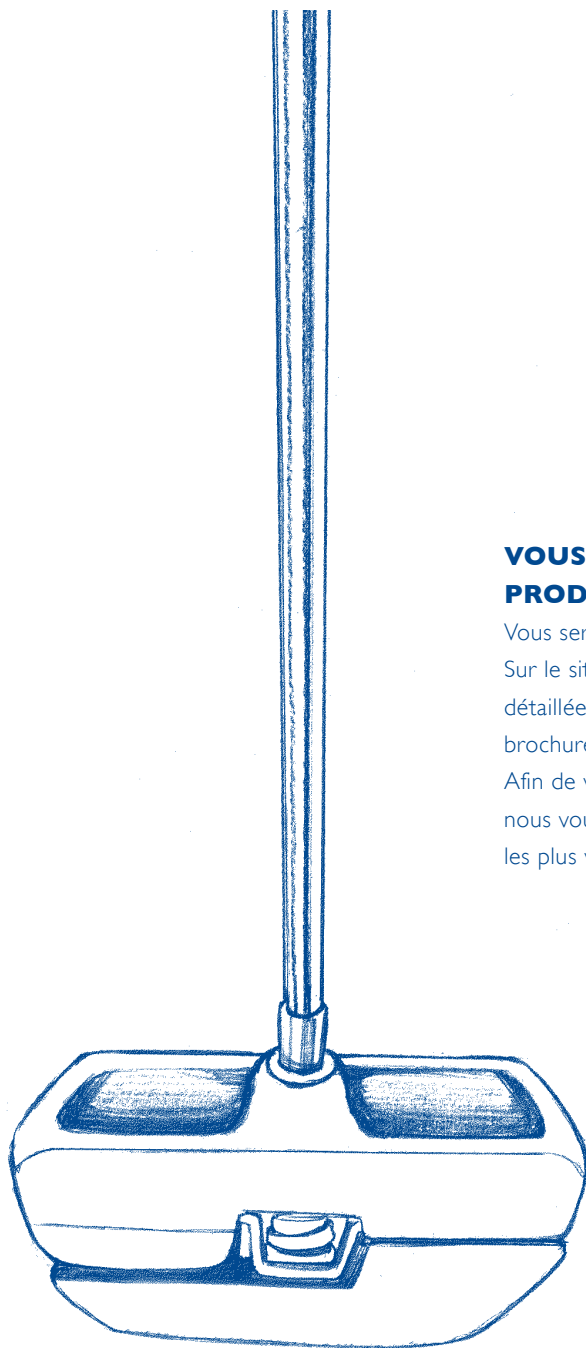

VOUS NE CONNAISSEZ PAS ENCORE LES PRODUITS ANGIOTECH ?

Vous serez alors très certainement intéressé(e) par cet assortiment !
Sur le site www.cobramedical.be, vous trouverez une description
détaillée des produits ; vous avez la possibilité de télécharger les
brochures, illustrations des divers produits, etc.

Afin de vous donner sans plus attendre un aperçu de ces produits,
nous vous présentons, dans les pages suivantes, les quatre produits
les plus vendus.

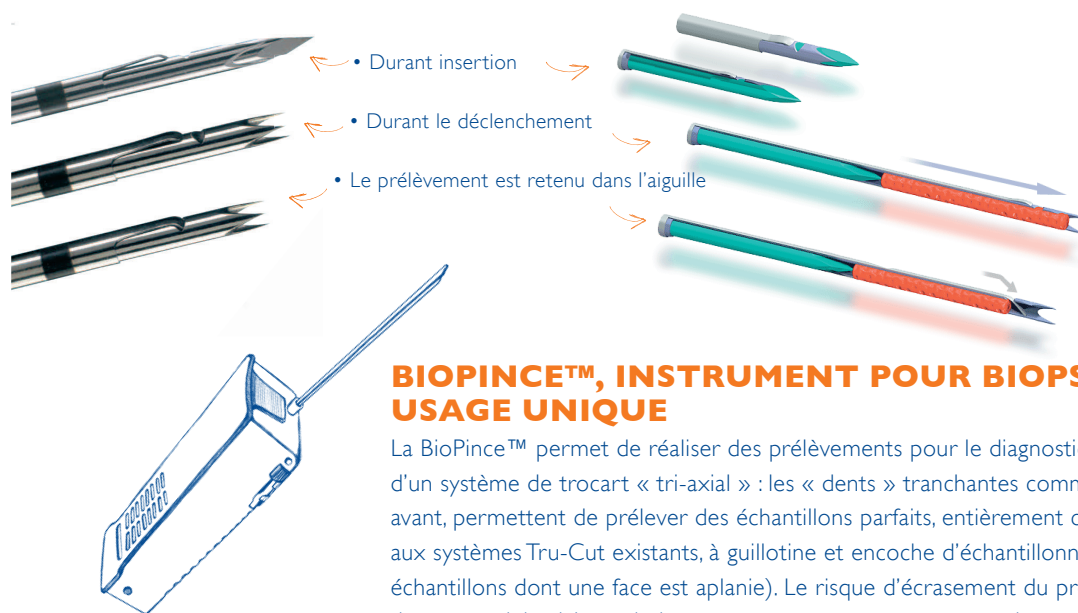

BIOPINCE™, INSTRUMENT POUR BIOPSIE COMPLÈTE À USAGE UNIQUE

La BioPince™ permet de réaliser des prélèvements pour le diagnostic clinique. La BioPince™ est pourvue d'un système de trocart « tri-axial » : les « dents » tranchantes comme des lames de rasoir, situées en avant, permettent de prélever des échantillons parfaits, entièrement cylindriques (un avantage par rapport aux systèmes Tru-Cut existants, à guillotine et encoche d'échantillonnage latérale, qui produisent des échantillons dont une face est aplanie). Le risque d'écrasement du prélèvement et de fragmentation des tissus est minimal. La technique « coupe et capture » permet de retenir le prélèvement dans l'aiguille.

Caractéristiques et avantages

- Le prélèvement est relativement important et entièrement cylindrique (voir figure 1), et a pour avantage de contenir un volume de tissu jusqu'à 59 % plus important qu'avec les dispositifs traditionnels (la figure 2 présente un échantillon effectué avec un instrument de biopsie traditionnel avec encoche d'échantillonnage latérale) ;
- Choix parmi plusieurs profondeurs de pénétration :
 - une profondeur de 13 mm produit un prélèvement de 9 mm de long ;
 - une profondeur de 23 mm produit un prélèvement de 19 mm de long ;
 - une profondeur de 33 mm produit un prélèvement de 29 mm de long ;
- La BioPince™ peut être utilisée en combinaison avec des aiguilles d'introducteur co-axiales ;
- Confortable pour le patient ;
- Aiguilles disponibles en 18G et 16G ;
- Pourvue de graduations tous les centimètres pour déterminer la profondeur de prélèvement avec précision ;
- Légère et facile à utiliser. Convient, par conséquent, très bien aux interventions sous guidage TDM.

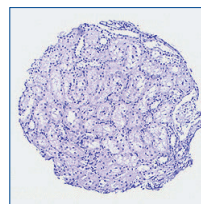


figure 1
Prélèvement complet par BioPince™


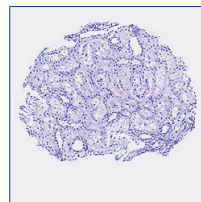


figure 2
Prélèvement par instrument de biopsie traditionnel à guillotine et encoche d'échantillonnage latérale


Démonstration

Sur notre site web www.cobramedical.be, allez dans le menu **Produits > Biopsie > Pistolets à biopsie/Instruments de biopsie** pour trouver plus d'informations sur la BioPince, ainsi qu'un petit film de démonstration.

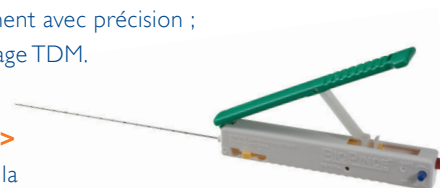

INSTRUMENT POUR BIOPSIE AUTOMATIQUE PRO-MAG™ ULTRA

Le pistolet pour biopsie automatique Pro-Mag™ Ultra est un instrument réutilisable, qui est employé avec des aiguilles à usage unique. Ce pistolet permet de récolter des prélèvements de haute qualité pour les examens histologiques.

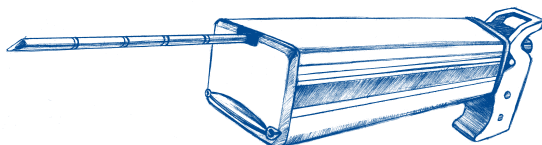

Caractéristiques et avantages

- Doté d'une avance par projection de 25 mm ;
- La gâchette s'actionne aisément de l'avant ou de l'arrière de l'instrument ;
- Pourvu d'une sécurité intégrée qui s'active automatiquement et empêche tout déclenchement accidentel du pistolet ;
- Le prélèvement peut facilement être extrait de l'aiguille, sans qu'il soit nécessaire de retirer celle-ci du pistolet ;
- Le pistolet peut être stérilisé selon les procédés conventionnels.



Dans son assortiment, Angiotech propose aussi des aiguilles à usage unique, conçues spécialement pour être utilisées avec le pistolet Pro-Mag™ Ultra. Les aiguilles sont pourvues de graduations tous les centimètres pour déterminer la profondeur de prélèvement avec précision et d'une pointe échogène pour un positionnement précis sous échoguidage. Des aiguilles d'introducteur co-axiales sont disponibles en option.

Aiguilles à biopsie Pro-Mag™ Ultra





Ces aiguilles ont une encoche d'échantillonnage de 19 mm, ce qui permet d'obtenir des échantillons suffisamment importants pour le diagnostic. De plus, ce design unique rend les « espaceurs » d'aiguille obsolètes.



Aiguilles à biopsie ACN™




Conçues spécialement pour être utilisées avec l'instrument pour biopsie automatique Pro-Mag™ 2.2. Elles sont pourvues d'une encoche d'échantillonnage de 17 mm.



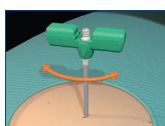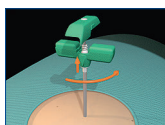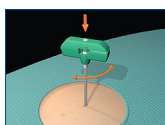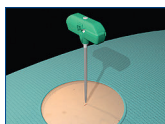

AIGUILLES À BIOPSIE OSSEUSE T-LOK™

L'aiguille à biopsie T-Lok™ permet de réaliser facilement des prélèvements de moelle osseuse de bonne qualité. Le design révolutionnaire de la canule d'extraction de l'aiguille T-Lok permet de retenir la moelle prélevée en toute sécurité dans l'aiguille, sans que la structure de l'échantillon ne soit endommagée.

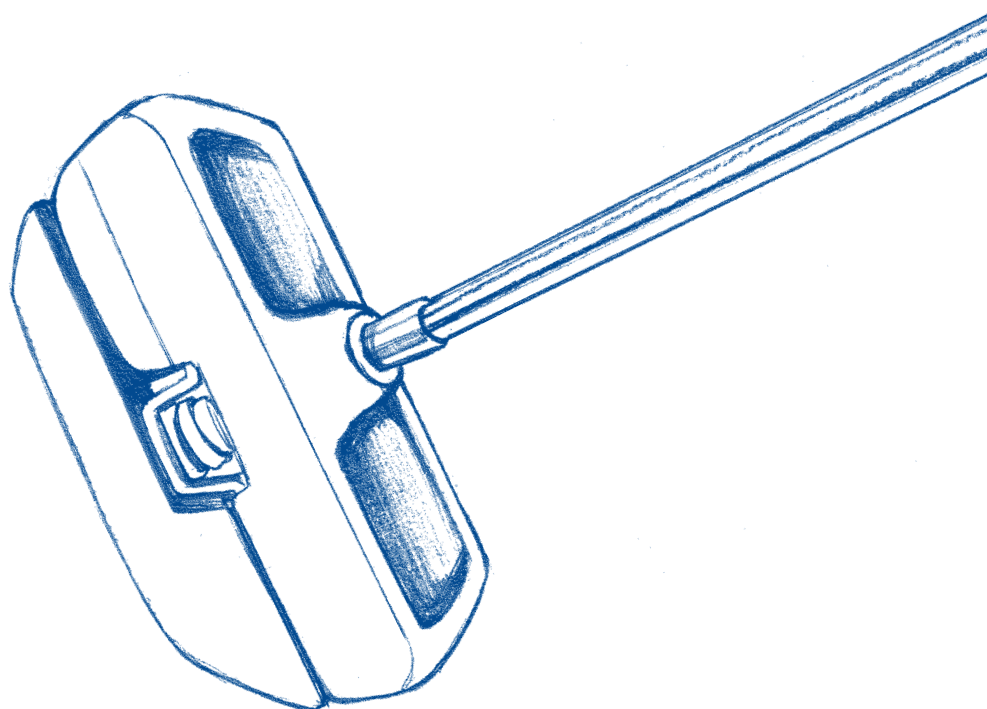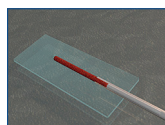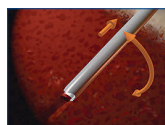




Caractéristiques et avantages

- Facile d'utilisation ;
- Confortable pour le patient ;
- Poignée ergonomique à verrouillage rotatif (Twist-Lock) pour une prise optimale ;
- La pointe unique, effilée, à double diamant, garantit une pénétration facile dans les os durs ;
- Le risque d'endommager ou de perdre l'échantillon est faible grâce au design révolutionnaire et innovant de la canule d'extraction T-Lok™, qui capture et enferme en toute sécurité la moelle prélevée dans l'aiguille ;
- Convient notamment au prélèvement de moelle osseuse chez les patients souffrant de myélome multiple (maladie de Kahler) ;
- Grâce à l'aiguille T-Lok™, l'intervention douloureuse, qui consistait à courber l'aiguille afin de permettre un prélèvement satisfaisant, appartient au passé.

Démonstration

Sur notre site web www.cobramedical.be, allez dans le menu **Produits > Biopsie > Biopsie de moelle osseuse** pour trouver plus d'informations sur **l'aiguille à biopsie T-Lok™**, ainsi qu'un petit film de démonstration.


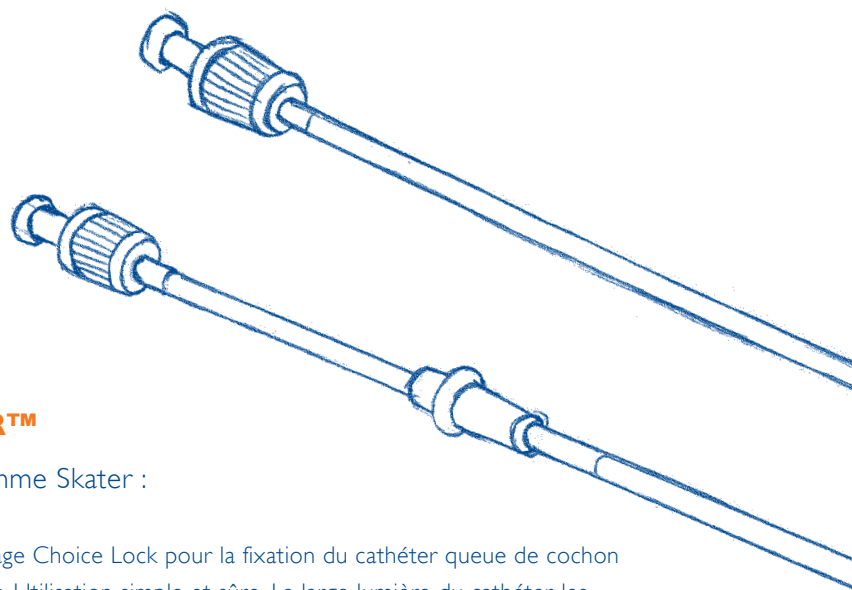


CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™

Six sortes de produits sont disponibles dans la gamme Skater :

1. **Set de drainage SKATER™ One Step** avec blocage Choice Lock pour la fixation du cathéter queue de cochon à l'aide d'une seule main. Convient à diverses applications. Utilisation simple et sûre. La large lumière du cathéter, les grands orifices biseautés de drainage et la large lumière de l'embase du cathéter permettent un écoulement et un drainage optimaux et préviennent l'obturation du cathéter. Avantages pour le patient : port confortable, polyuréthane résistant au pliage, facile à insérer grâce au revêtement HYDROFEEL® et résistant aux incrustations. Disponible en queue de cochon verrouillable ou non verrouillable.
2. **Cathéter de néphrostomie SKATER™** pour le drainage de l'urine dans le rein. Ce cathéter est constitué de polyuréthane mou, et il est donc résistant au pliage et confortable pour le patient. Grâce à sa conception robuste en queue de cochon, le cathéter conserve sa forme et reste bien en place dans le bassinnet du rein. Conçu pour la technique de Seldinger. Le revêtement hydrophile facilite l'insertion du cathéter. Redresseur de queue de cochon amovible.
3. Le **cathéter de drainage SKATER™** est constitué de polyuréthane mou, résistant au pliage et avec mémoire de forme. La partie distale du cathéter est pourvue d'un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ qui en facilite l'insertion. Les grands orifices de drainage ovales et la large lumière du cathéter garantissent une capacité de drainage optimale. Disponible en queue de cochon verrouillable ou non verrouillable.
4. Le **cathéter de drainage biliaire SKATER™** est utilisé pour le drainage de la bile hors du canal cholédoque, et est mis en place au moyen de la technique de Seldinger. Le dernier orifice de drainage est pourvu d'un marquage radiopaque, pour faciliter la mise en place précise du cathéter dans le canal. Le polyuréthane mou empêche le pliage et fait en sorte que le cathéter reprenne toujours sa forme originale. L'insertion se fait aisément, grâce au revêtement HYDROFEEL®. Les grands orifices de drainage ovales et la large lumière du cathéter garantissent une capacité de drainage optimale. Redresseur de queue de cochon amovible.

5. Les **kits SKATER™**, avec entre autres un kit de néphrostomie avec cathéter queue de cochon verrouillable ou non verrouillable, un kit SKATER™ introducteur pour néphrostomie et un kit SKATER™ introducteur avec cathéter queue de cochon verrouillable pour la pose d'un drain biliaire.
6. **Cathéter de paracentèse SKATER™**, conçu pour l'aspiration percutanée de liquides et le drainage de petites quantités de liquides. Une valve permet d'évacuer l'air du cathéter lors de son insertion tout en protégeant le médecin contre les projections de liquide. Aiguille d'introducteur Luer-lock pour une mise en place facile à l'aide d'une seule main. Le stylet creux permet d'aspirer les liquides préalablement à l'extraction du stylet. La pointe échogène de l'aiguille facilite la visualisation pour la mise en place sous échoguidage. L'extrémité effilée du cathéter assure une bonne transition entre le cathéter et l'aiguille, ce qui en facilite l'insertion. Quatre petits trous latéraux situés à l'extrémité distale du cathéter facilitent le drainage des petites cavités.

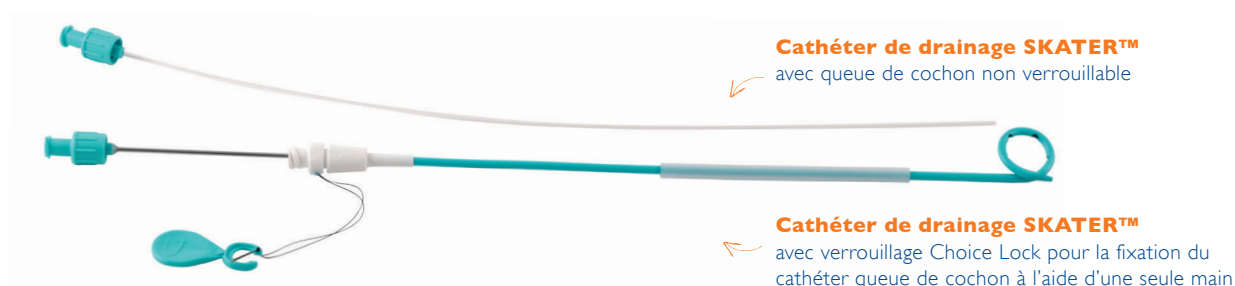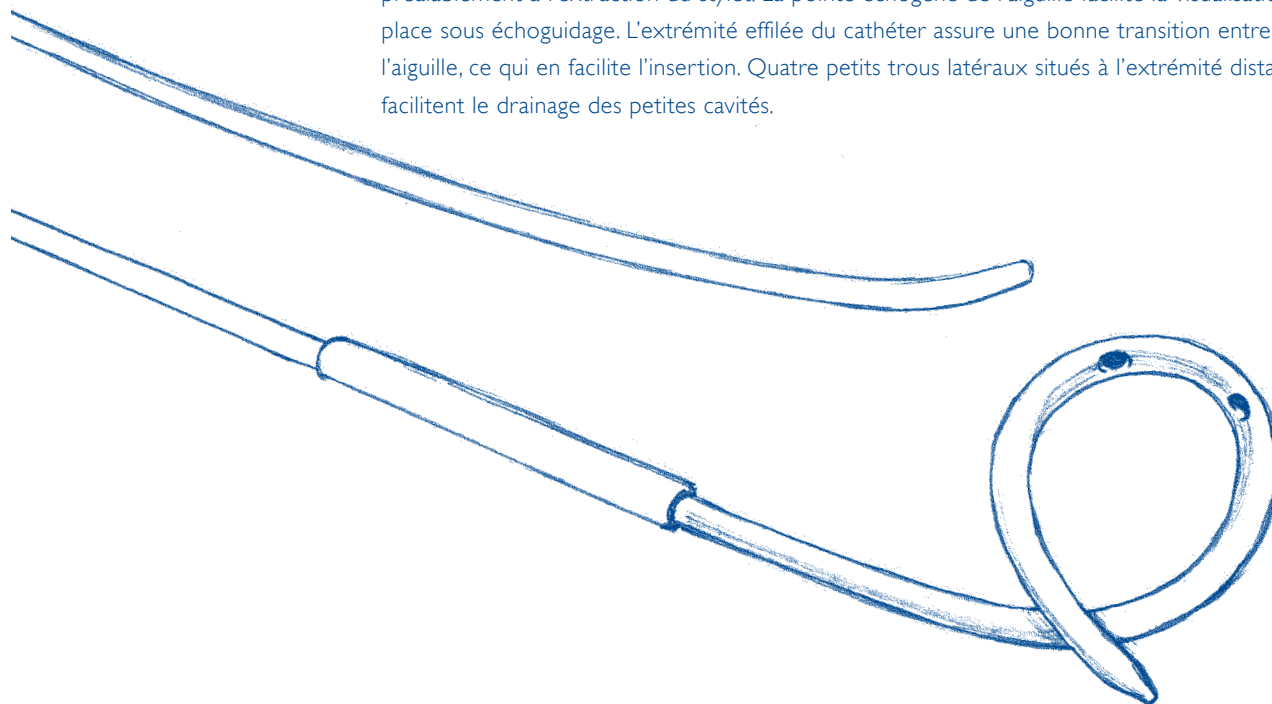



Cobra Medical BV
Stavangerweg 21-14
9723 JC Groningue
Boîte Postale 5153
9700 GD Groningue
Pays-Bas
Tél.: 070 66 05 70
Fax: 070 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be

Biopsie Drainage Vasculaire HSG & Prostate