

15. Accessoires

Er zijn diverse accessoires voor de verschillende typen PEG-, gastrostomie- en overige soorten voedingskatheters verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan adapters, kraantjes en klemmetjes. De producten zijn geschikt voor onze MIC-producten en kunnen veelal ook gebruikt worden voor de meeste andere merken voedingskatheters.

Cobra Medical levert een groot aantal dopjes, adapters, verbindingstukjes en kraantjes van verschillende merken en met verschillende functies. Hieronder staat slechts een kleine greep uit ons assortiment. Bent u op zoek naar iets dat niet in onderstaand overzicht staat? Neemt u dan contact met ons op. De kans is groot dat wij het voor u kunnen bestellen.

Klemmetjes

Om PEG- of gastrostomiekatheter tijdelijk af te sluiten, worden klemmetjes gebruikt. Bij een aantal katheters worden door de fabrikant klemmetjes meegeleverd.

Cobra Medical levert diverse soorten en maten in verpakkingen van tien stuks.

Let op! Klemmetjes kunnen het lumen van katheters met een ballonsysteem beschadigen. Ze moeten daarom zo kort mogelijk worden gebruikt en na gebruik worden verwijderd. Een alternatief is een klem die eenvoudig na gebruik van de katheter kan worden afgeschoven.

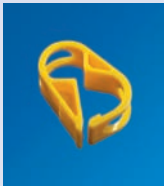


Artikelnummer

HBA01040

Specificaties

Cobra klem (transparant) voor PEG- en gastrostomiekatheters t/m 20FR. Kan bij gastrostomiekatheters alleen worden gebruikt als deze nog niet is geplaatst. Levering per tien stuks.

	Artikelnummer	Specificaties
	HBB01067	Cobra klem (geel) voor PEG- en gastrostomiekatheters t/m 14FR. Heeft geen zijopening en kan daarvoor bij gastrostomiekatheters alleen worden gebruikt als deze nog niet is geplaatst. Levering per tien stuks.
	HBFO1043	Cobra klem (wit) voor 18 en 20FR katheters. Met zijopening: kan eenvoudig worden geplaatst en verwijderd, ook als de gastrostomiekatheter al geplaatst is. Levering per tien stuks.
	99940	Cobra klem (groen) voor 12FR en 14FR katheters. Kan ook gebruikt worden als de gastrostomiekatheter al geplaatst is. Levering per tien stuks.

Huidplaatjes

Bij elke PEG-katheter wordt een huidplaatje meegeleverd. Deze plaatjes, ook wel fixatieplaatjes of fixatiedisks genoemd, zijn vaak onderling inwisselbaar. Zo kiest u altijd het huidplaatje dat u het prettigst vindt.



Artikelnummer

909209 (9FR)
909215 (15FR)

Specificaties

Medi-Globe / Fresenius huidplaatje

voor 9FR (geel-wit) / 15FR (blauw-wit) katheters. Levering per stuk.



35709 (10FR)
35710 (14FR)
35711 (18FR)

Cobra fixatiedisk voor 10, 14 en 18FR katheters van Nutricia, BARD en Kimberly-Clark. Levering per stuk.

Adapters

Adapters voor voedingskatheters zijn er in vele soorten en maten. Hier volgt een opsomming van de meest gebruikte adapters.

Aansluiten

Met de volgende adapters kan een male- of female-aansluiting gecreëerd worden, bijvoorbeeld voor een luer-lock spuit.



Artikelnummer

892.00

Specificaties

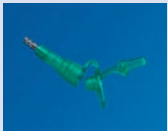
Cobra Luer-lock adapter female / female.

Levering per tien stuks.

	Artikelnummer	Specificaties
	893.00	Cobra Luer-lock adapter male / male. Levering per tien stuks.

Twee openingen

De volgende adapters hebben twee afsluitdopjes. De kleine opening is geschikt voor het toedienen van medicatie. In de grote opening past een conische tip, zodat bijvoorbeeld bolusvoeding gegeven kan worden.

	Artikelnummer	Specificaties
	909002	Medi-Globe / Fresenius adapter female (bolusaansluiting) luer. Wordt meegeleverd met de Medi-Globe PEGgi. Levering per tien stuks.
	35716 (10FR) 35717 (14FR) 35718 (18FR)	Cobra / Nutricia feedingconnector. Verkrijgbaar in de maten 10FR (zwart), 14FR (groen) en 18FR (rood). Levering per stuk.

Adapter luer-lock

Deze adapter past op zowel de PEGgi van Medi-Globe als op de PEG van Fresenius. De adapter is verkrijgbaar in een 9FR- (wit-geel) en een 15FR-uitvoering (wit-blauw).



Artikelnummer

909109 (9FR)
909115 (15FR)

Specificaties

Medi-Globe / Fresenius adapter luer-lock. Wordt 909115 meegeleverd met de Medi-Globe PEGgi (9FR en 15FR).
Levering per stuk.

Conische adapter en eindconnector

De volgende twee producten worden vaak in combinatie gebruikt. Samen vormen ze een luer-lock aansluiting op een gastrostomiekatheter, die met de witte eindconnector kan worden afgesloten.



Artikelnummer

801.02

Specificaties

Cobra conische adapter male luer-lock met bolusaansluiting. Wordt veelal gebruikt om op een gastrostomiekatheter een luer-lockaansluiting te creëren.
Levering per tien stuks.



9889.002

Cobra eindconnector (wit) luer-lock male / female.
Levering per tien stuks.

MIC-PEG voedingsadapters

Onze MIC-PEG voedingsadapters zijn verkrijgbaar in de maten 14FR, 20FR en 24FR.



Artikelnummer

0136-14 (14FR)
0136-20 (20FR)
0136-24 (24FR)

Specificaties

Universele voedingsadapter bolus met medicijnpoort voor de MIC-PEG en de de siliconenkatheters van BARD en US Endoscopy.
Levering per stuk.



0137-14 (14FR)
0137-20 (20FR)
0137-24 (24FR)

Universele voedingsadapter luer-lock voor de MIC-PEG en de katheters van BARD en US Endoscopy.
Levering per stuk.

Overige accessoires

Cobra driewegkraantje

Dit kraantje is ideaal als er continu voeding wordt gegeven. Door het kraantje dicht te draaien, kan via de zijpoort medicatie worden toegediend. Ook kan via deze poort worden gespoeld.



Artikelnummer

70876.20

Specificaties

Cobra driewegkraantje met male- en femaleuiteinde.
Levering per tien stuks.

Jelly

Om het vervangen van een katheter soepel te laten verlopen, kan glijmiddel op waterbasis worden gebruikt.



Artikelnummer

Specificaties

T00128

Cobra glijmiddel in gelzakje
(inhoud 2,7 gram).
Levering per twaalf stuks.