



COBRA MEDICAL

COMPLEET • KENNIS • INNOVATIEF • SERVICE

Cobra Medical is dagelijks bezig met het optimaliseren van haar assortiment en werkt samen met diverse partners om onze klanten te voorzien van een compleet pakket voor gastro enterologische procedures.

Eén van deze producten is de SonoTip® Pro Control van onze partner Medi-Globe. Zij zijn één van de voorlopers op het gebied van deze Endoscopische US-geleide FNA naalden. Al in de jaren '90 hebben zij -samen met Prof. Dr. Villmann - de eerste EUS-FNA naald op de markt gebracht. Prof. Dr. Villmann is ook weer betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze naald.

 **Medi-Globe®**
The Spirit of Care.™

 **SonoTip®**
Pro Control

UNIEK met naaldstabilisator:

Deze naald biedt een veilige punctie voor de patiënt. Door de verdikte tip ligt de naald zeer stabiel in het grote werkkanaal van de endoscoop, waardoor de naald zeer nauwkeurig te positioneren is. Deze optie is verkrijgbaar bij de maten 22G en 25G.



Voor alle uitgebreide productinformatie,
raadpleeg onze website


www.cobramedical.com/EUS-EBUS

UNIEK Patent:

Met de Twist-Lock® technologie voor sheath- en naaldlengte aanpassing is de naald altijd met één hand te bedienen, ongeacht de stand van het handvat ten opzichte van de naald op de scoop. De traploze sheet- en naaldlengte zijn in te stellen op elke gewenste maat.

UNIEK specifieke naald scherppte

vergelijking naaldtip diverse EUS naalden

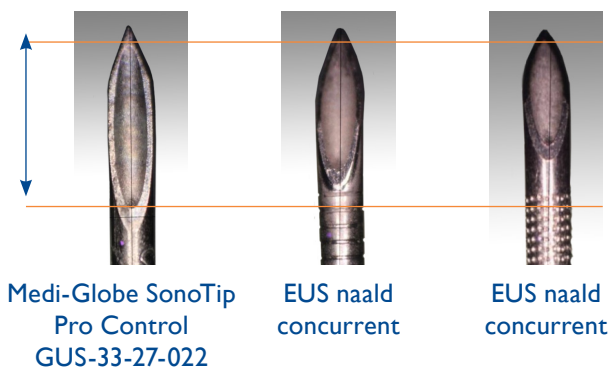

Deze naald is aangescherpt in een hoek van 15°: dit design zorgt voor

- 1) bovengemiddelde opbrengst
- 2) gemakkelijke, a-traumatische punctie in harde laesies.

De naalden zijn verkrijgbaar met een beveled en round stylet.

ONGECOATE, NITINOL VOERDRAAD

GEEN beschadigde voerdraaden meer met deze ongecoate en nitinol 0.30" voerdraad. Dit in tegenstelling tot de standaard Teflon voerdraaden. Verder is deze draad uitgerust met een 15 centimeter flexibele en radiopaque tip.



VERKRIJGBAAR IN I9G

Deze I9G naald is perfect voor biliaire-pancreatische puncties waarbij het gebruik van een voerdraad noodzakelijk is.

PSEUDO-CYST DOUBLE PIGTAIL STENT

De stents zijn –zowel los als in set*- verkrijgbaar in maar liefst acht verschillende French en lengte maten met drie positiemarkers.



*set bestaat uit stent en pusher

catalogus.cobra-medical.nl